



Upgrade · The Home Creator Way

Tub Transfer Benches

Model: FBL630264

MODEL:FBL630264



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards. The manufacturer declines all responsibility in case of damage due to a bad installation.
2. Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.
3. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
4. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
8. Product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.
9. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
10. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
12. Please use the product according to the intended use, and warn of potential injury from misuse.
13. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:


- Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.
- Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.
- Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.
- Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly
- Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

IMPORTANT


- 1) Don't exceed the maximum weight capacity.
- 2) Only for use on bathtubs that are stable and have flat surfaces on both sides.
- 3) Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
- 4) Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

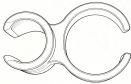NO	PART NUMBER	PICTURE	QTY	NO	PART NUMBER	PICTURE	QTY
#1	Backrest		1	#6	Chair foot B		2
#2	Backrest connect tube		2	#7	Armrest		1
#3	Trestle A		1	#8	Shower buckle		1
#4	Trestle B		1	#9	Manual		1
#5	Chair foot A		2				

DIMENSIONAL PARAMETERS

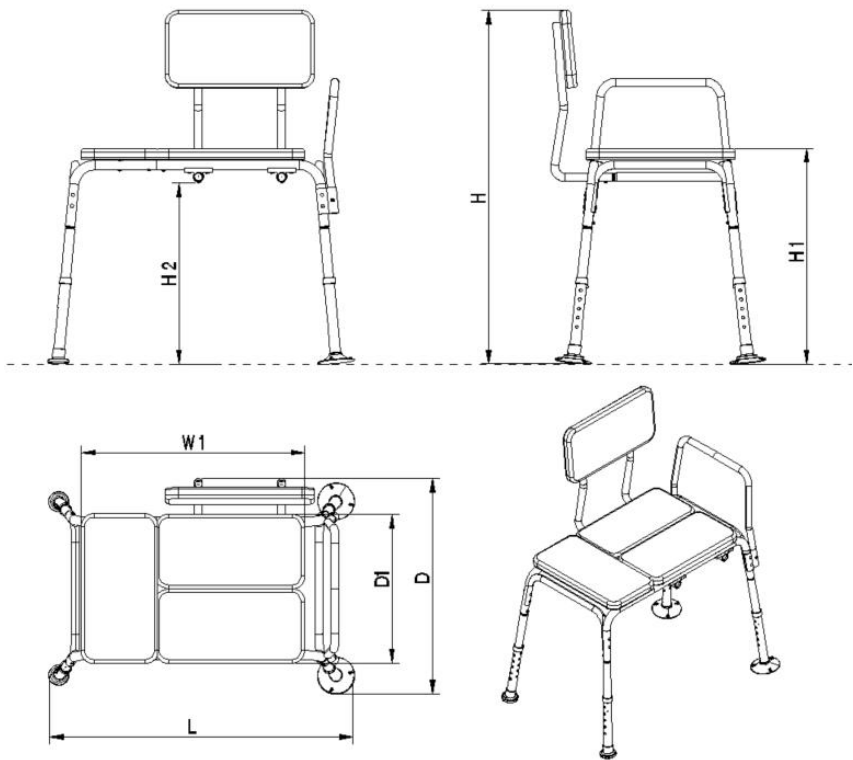

Unit:(mm/in)			
L	D	H	D1
800-810 (31.5-31.9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32.3-36.6)	400(15.7)
W1	H1	H2	
600(23.6)	485-600 (19.1-23.6)	385-500 (15.2-19.7)	


※There may be a ±20mm error in the measurement of some dimensions, which is normal and not a product quality issue.

PAREMETERS



Model	FBL630264
Main Materials	Aluminum
Seat Rated Load	227kg/500lbs

INSTALL INSTRUCTIONS

Step1.Place trestle A and trestle B upside down on a plane, and insert trestle A into trestle B.

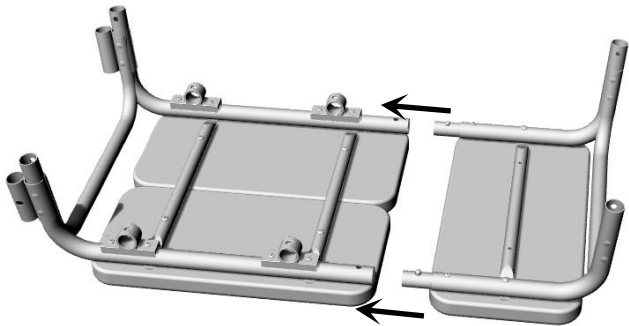


Step2.Insert the Chair foot(A&B) assembly into the trestle A and the trestle B.

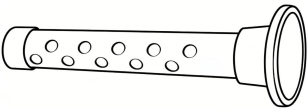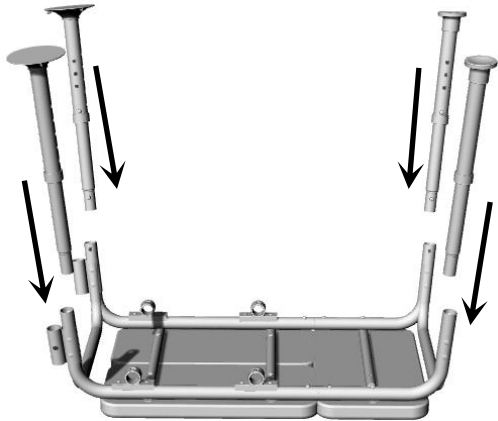


The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Step3. Insert the backrest assembly backrest connection pipe into the backrest assembly.

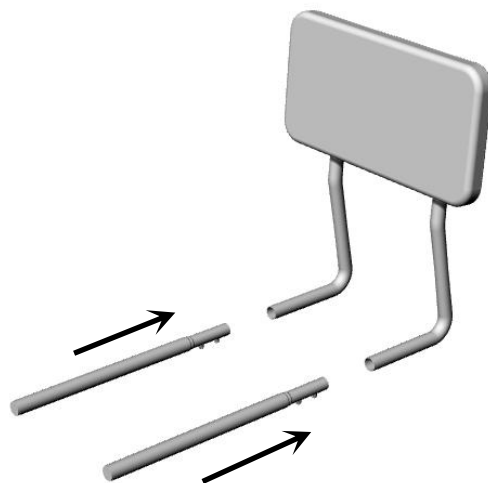


Step4. Insert the backrest assembly into the support hole of connection pipe under the seat.

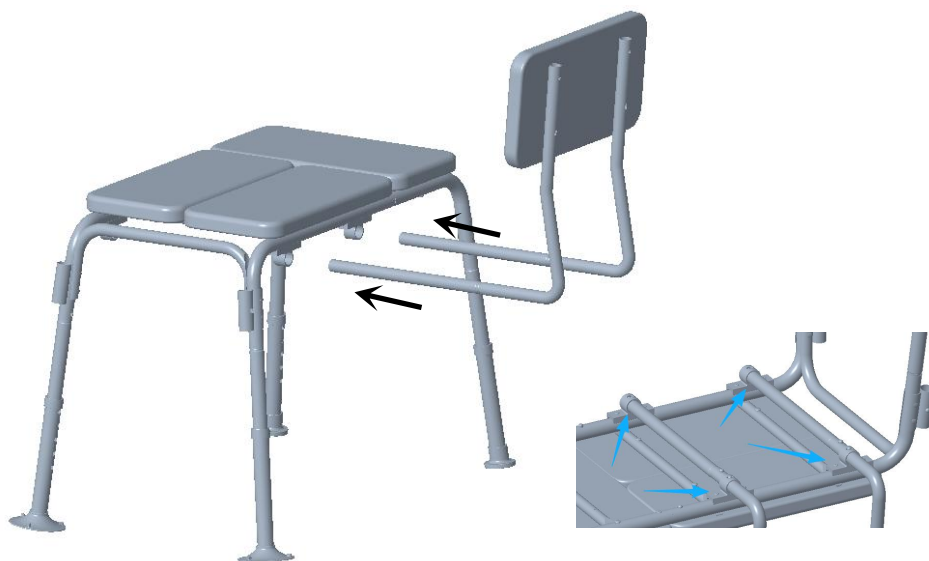


Step5. Insert the armrest into the pipe of trestle B.



Step6. Fix the shower buckle to the armrest.

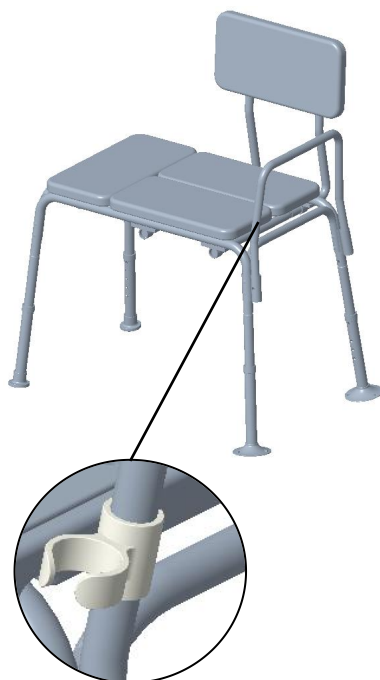

Leveling

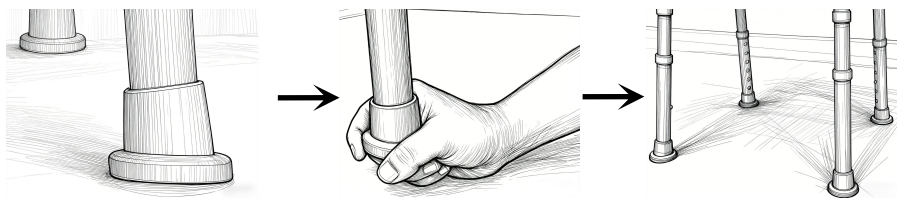

If the foot mat is not placed flat on the ground, rotate it until it is fully in contact with the ground.

USE INSTRUCTIONS

USING WARNING:

- (1) Put the shower bench stably on a flat floor.
- (2) Before use, please make sure that the screw has been tightened and the ball pin of the legs has been ejected from the slot.
- (3) Before use, adjust the shower bench to an appropriate height so that when the two legs are supported in the bathtub, the seat is smooth.
- (4) Check the stability of the shower bench before using it every time. Stop using it if the legs are shaking or the shower bench is unstable.
- (5) Avoid the overload.
- (6) The shower bench should not be used to push the user while seated.
- (7) Shower bench must be used ONLY for taking a shower inside bathroom, not for any other purposes.
- (8) Adjust the shower bench legs to a suitable height so that the user's feet from toes to heels comfortably touch the floor when sitting on it.
- (9) Stay away from open flames.
- (10) Periodically check whether screws have been tightened.
- (11) Ensure that rubber tips at the bottom of the shower bench's legs are not worn out. If not, replace them immediately.
- (12) Please read carefully before use and do not tear off the label.

MAINTENANCE

- Wash with clean or mild soapy water and air dry after use.
- When not in use, please store in a cool and dry place
- Check the shower bench regularly.

STORAGE CONDITIONS

* The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.





Upgrade · The Home Creator Way

Bancs de transfert pour baignoires

Modèle: FBL630264

MODÈLE : FBL630264



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

14. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise installation.
15. Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage.
16. Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
17. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .
18. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
19. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
20. Ne procédez pas à l'assemblage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
21. Les capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit correctement et entièrement assemblé.
22. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et il ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées.
23. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
24. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez si le produit est anormal avant utilisation. S'il est anormal, Veuillez cesser de l'utiliser.
25. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et mettre en garde contre les risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

26. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du produit ou d'annulation de la garantie. Consultez un professionnel de la santé en cas d'inconfort, de douleur ou d'aggravation des symptômes. Si nécessaire, faites-vous accompagner d'une personne pour assembler et utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids.
- Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et contactez le service client en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien alignés et verrouillés avant utilisation et cessez immédiatement toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur des surfaces planes et stables. Ne le démontez pas sauf si cela est nécessaire, car cela pourrait réduire sa durée de vie. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.
- Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez soigneusement pour éliminer tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
- Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

IMPORTANT

- 5) Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
- 6) À utiliser uniquement sur des baignoires stables et présentant des surfaces planes des deux côtés.

7) Inspectez régulièrement les pièces pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de pièces desserrées.

8) Avant utilisation, veuillez vérifier auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne sauraient se substituer à un avis médical.


LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces énumérées ci-dessous sont incluses. et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. Le cas échéant Une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NO N	NUMÉRO DE PIÈCE	IMAGE	Qté	NO N	NUMÉRO DE PIÈCE	IMAGE	Qté
# 1	Dossier		1	#6	Pied de chaise B		2
# 2	Tube de raccordement du dossier		2	#7	Accoudoir		1
# 3	Tréteau A		1	#8	Boucle de douche		1

# 4	Tréteau B		1	#9	Manuel		1
#5	Pied de chaise A		2				

PARAMÈTRES DIMENSIONNELS

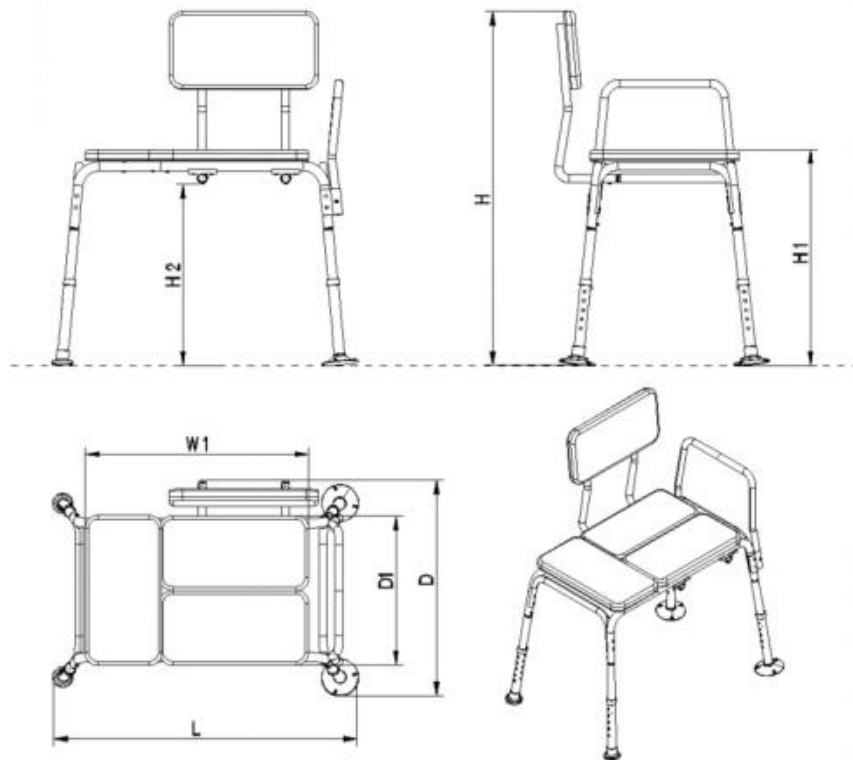

Unité : (mm/po)			
L	D	H	D1
800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32.3-36.6)	400(15,7)
W1	H1	H2	
600(23,6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5.2 - 19.7)	


※ Il peut y avoir une erreur de ± 20 mm dans la mesure de certaines dimensions, ce qui est normal et ne constitue pas un problème de qualité du produit.

PARAMÈTRES



Modèle	FBL630264
Matériaux principaux	Aluminium
Siège Charge nominale	227 kg / 500 lbs

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Placer le tréteau Un et un tréteau B à l'envers sur un plan, et insérer le tréteau Un dans un tréteau B.

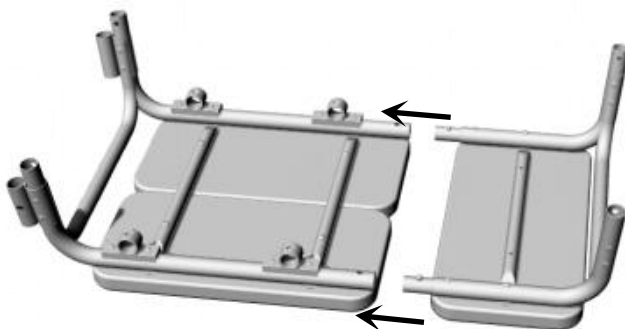


Étape 2. Insérez l' ensemble pied de chaise (A et B) dans le repose - pied A et le repose - pied B.

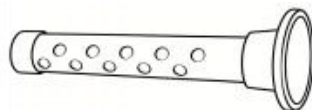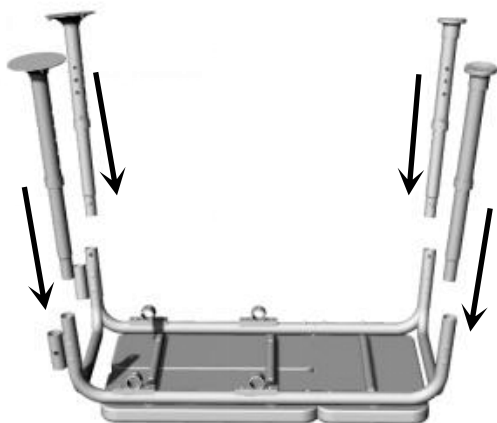

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Étape 3. Insérez le tuyau de raccordement du dossier dans l'ensemble du dossier .

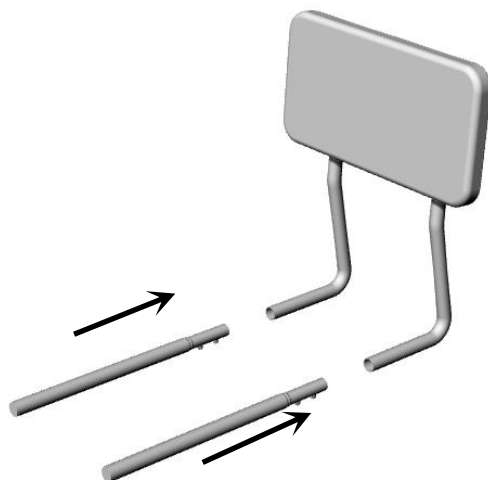

Étape 4. Insérez l'ensemble du dossier dans le trou de support du tuyau de raccordement sous le siège.



Étape 5. Insérez le repose - bras dans le tuyau de t restle B .



Étape 6. Fixez la boucle de douche à l'accoudoir .



Nivellement



Si le tapis de sol n'est pas placé à plat sur le sol, faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il soit entièrement en contact avec le sol.

MODE D' EMPLOI

CONCERNANT L'UTILISATION :

(13) Placez le banc de douche de manière stable sur un sol plat.

(14) Avant utilisation, veuillez vous assurer que la vis est bien serrée et que la rotule des pieds est bien sortie de son logement.

(15) Avant utilisation, réglez le banc de douche à une hauteur appropriée afin que, lorsque les deux pieds reposent dans la baignoire, le siège soit bien stable.

(16) Vérifiez la stabilité de la douche Vérifiez la stabilité du banc avant chaque utilisation . Cessez de l' utiliser si les pieds tremblent ou si le banc de douche est instable.

(17) Évitez la surcharge.

(18) Le banc de douche ne doit pas être utilisé pour pousser l'utilisateur lorsqu'il est assis.

(19) Le banc de douche doit être utilisé UNIQUEMENT pour prendre une douche dans la salle de bain, et non à d'autres fins.

(20) Réglez les pieds du banc de douche à une hauteur appropriée afin que les pieds de l'utilisateur, des orteils aux talons, touchent confortablement le sol lorsqu'il est assis dessus.

(21) Tenez-vous à l'écart des flammes nues.

(22) Vérifiez régulièrement si les vis ont été serrées.

(23) Vérifiez que les embouts en caoutchouc situés au bas des pieds du banc de douche ne sont pas usés. Si c'est le cas, remplacez-les immédiatement.

(24) Veuillez lire attentivement avant utilisation et ne pas arracher l'étiquette.

ENTRETIEN

- Laver à l'eau claire ou savonneuse (avec un savon doux) et laisser sécher à l'air libre après utilisation.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez le ranger dans un endroit frais et sec.
- Vérifiez régulièrement le banc de douche .

CONDITIONS DE STOCKAGE

* Le tissu doit être stocké parfaitement sec, dans un endroit propre et sec afin d'éviter les risques de moisissure .





Badewannentransferbänke

Modell: FBL630264

MODELL: FBL630264



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu

Verletzungen oder Sachschäden führen.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI VERSAMMLUNGEN

27. Bitte montieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
28. Vorsicht vor Quetsch- und Schnittverletzungen beim Zusammenbau.
29. Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
30. und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .
31. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
32. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
33. Nehmen Sie nicht an der Versammlung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
34. Die Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
35. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
36. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
37. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Falls es Mängel aufweist, Bitte hören Sie auf, es zu benutzen.

38. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und weisen Sie auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

39. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, um Verletzungen, Produktschäden oder den Verlust der Garantie zu vermeiden. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlimmerung der Symptome auftreten. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer Aufsichtsperson helfen, um das Produkt korrekt und sicher zu montieren und zu verwenden. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze.
- Überprüfen Sie regelmäßig den sicheren Aufbau und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Standfüße des Produkts gleichmäßig ausgerichtet und eingerastet sind. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder fehlenden Teilen erkennbar sind. Das Produkt darf nur auf ebenen, stabilen Oberflächen verwendet werden. Zerlegen Sie das Produkt nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, es sei denn, diese sind in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.
- Bei Bedienung und Montage ist Vorsicht geboten. Extreme Temperaturen und offene Flammen sind zu vermeiden. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und Seifenreste abspülen. Nach der Reinigung gründlich trocknen.
- Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen

Bedingungen.

WICHTIG

- 9) Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- 10) Nur zur Verwendung auf Badewannen, die stabil sind und auf beiden Seiten ebene Flächen aufweisen.
- 11) Regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder lose Teile prüfen.
- 12) Bitte klären Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker, ob das Produkt Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Hinweise ersetzen keine ärztliche Beratung.


TEILELISTE

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind. und prüfen Sie sorgfältig, ob während des Transports Schäden entstanden sind. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

NEI N	TEILENU MMER	BILD	ME NG E	NEI N	TEILENUM MER	BILD	MEN GE
# 1	Rückenleh ne		1	#6	Stuhlfuß B		2
# 2	Verbindun gsrohr der Rückenleh ne		2	#7	Armlehne		1

# 3	Gerüst A		1	#8	Duschschn alle		1
# 4	Gerüst B		1	#9	Handbuch		1
#5	Stuhlfuß A		2				

DIMENSIONALE PARAMETER

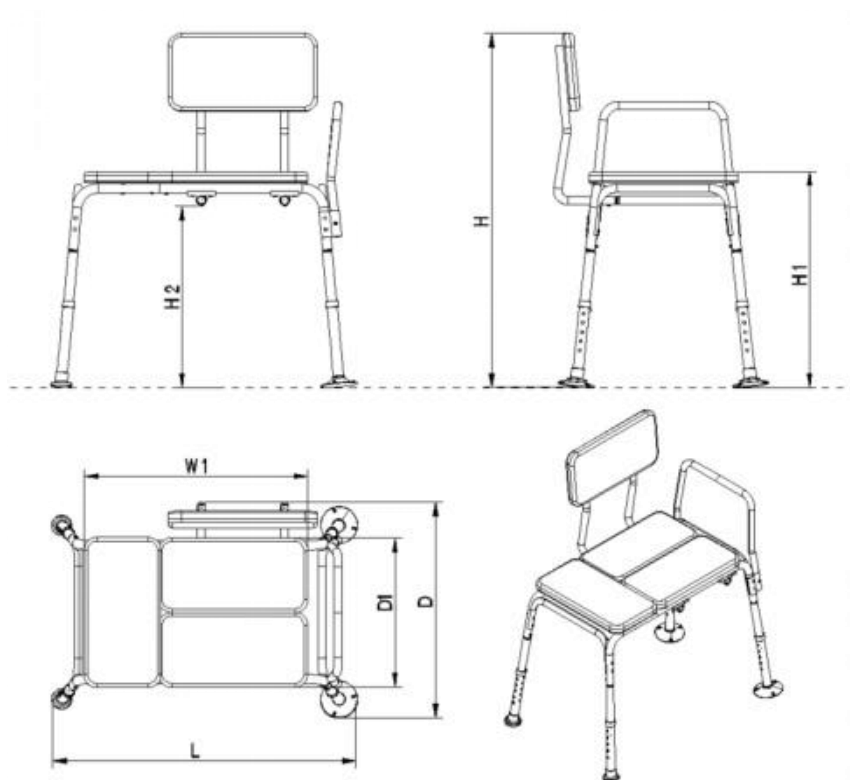

Einheit: (mm/in)			
L	D	H	D1
800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32,3-36,6)	400 (15,7)
W1	H1	H2	
600(23.6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5.2 - 19.7)	

※ Bei der Messung einiger Abmessungen kann es zu einem Fehler von ± 20 mm kommen. Dies ist normal und kein Mangel der Produktqualität.


PARAMETER

Modell	FBL630264
--------	-----------



Hauptmaterialien	Aluminium
Sitz Nennlast	227 kg / 500 Pfund

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1. Bock platzieren A und Bock B auf einer Ebene umgedreht und ein Gestell eingesetzt A in Bock B.

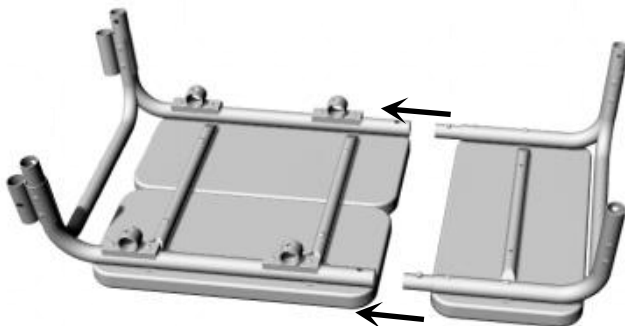


Schritt 2. Setzen Sie die Stuhlfußbaugruppe (A&B) in das Gestell A und das Gestell B ein .

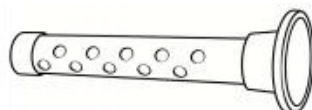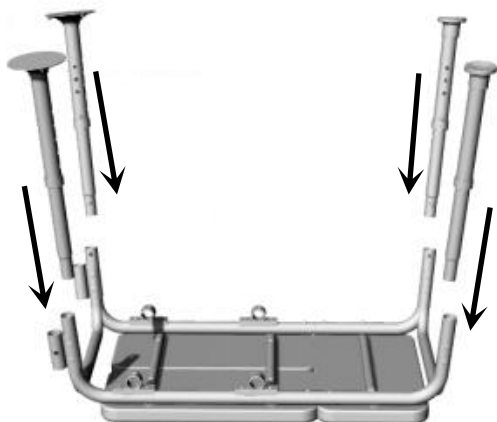

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Schritt 3. Setzen Sie das Verbindungsrohr der Rückenlehnenbaugruppe in die Rückenlehnenbaugruppe ein .

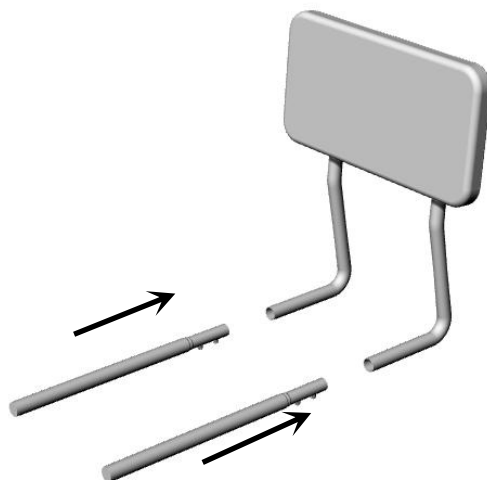

Schritt 4. Setzen Sie die Rückenlehnenbaugruppe in die Stützöffnung des Verbindungsrohrs unter dem Sitz ein.



Schritt 5. Setzen Sie die Armlehne ein . in das Rohr von t restle B .



Schritt 6. Befestigen Sie die Duschschnalle an der Armlehne .



Nivellierung



Wenn die Fußmatte nicht flach auf dem Boden liegt, drehen Sie sie so lange, bis sie vollständig Kontakt zum Boden hat.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI DER VERWENDUNG :

(25) Stellen Sie die Duschbank stabil auf einen ebenen Boden.

(26) Bitte vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Schraube festgezogen ist und der Kugelbolzen der Beine aus der Nut herausgedrückt wurde.

(27) Vor Gebrauch sollte die Duschbank auf eine geeignete Höhe eingestellt werden , sodass die Sitzfläche glatt ist, wenn die beiden Beine in der Badewanne abgestützt werden.

(28) Überprüfen Sie die Stabilität der Dusche . Überprüfen Sie die Duschbank vor jeder Benutzung. Verwenden Sie sie nicht mehr, wenn die Beine wackeln oder die Duschbank instabil ist.

(29) Überlastung vermeiden.

(30) Die Duschbank sollte nicht dazu benutzt werden , den Benutzer im Sitzen zu schieben.

(31) Die Duschbank darf NUR zum Duschen im Badezimmer benutzt werden , nicht für andere Zwecke.

(32) Stellen Sie die Beine der Duschbank auf eine geeignete Höhe ein , sodass die Füße des Benutzers von den Zehen bis zu den Fersen beim Sitzen bequem den Boden berühren.

(33) Halten Sie sich von offenen Flammen fern.

(34) Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest angezogen sind.

(35) Vergewissern Sie sich , dass die Gummifüße an den Unterseiten der Duschbankbeine nicht abgenutzt sind. Falls doch, tauschen Sie sie umgehend aus .

(36) Bitte lesen Sie die Lektüre vor Gebrauch sorgfältig durch und reißen Sie das Etikett nicht ab.

WARTUNG

- Nach Gebrauch mit sauberem oder mildem Seifenwasser waschen und an der Luft trocknen lassen.
- Bei Nichtgebrauch bitte kühl und trocken lagern.
- Sie die Duschbank regelmäßig .

LAGERBEDINGUNGEN

* Der Stoff sollte vollständig trocken an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden .





Upgrade · The Home Creator Way

Panche di trasferimento per vasche

Modello: FBL630264

MODELLO: FBL630264



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

PRECAUZIONI PER L'ASSEMBLEA

40. Assemblare il prodotto attenendosi esclusivamente a queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare dei rischi. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti a un'installazione errata.
41. Prestare attenzione al rischio di schiacciamento o tagli durante il montaggio.
42. Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con esso.
43. e l' utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
44. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
45. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
46. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
47. Le funzionalità del prodotto si riferiscono esclusivamente a un prodotto assemblato correttamente e completamente.
48. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate.
49. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
50. Conservare il prodotto in modo adeguato. Verificare se il prodotto è anomalo prima dell'uso. Se è anomalo, Per favore, smetti di usarlo.
51. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
52. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e

separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO:

- Leggere attentamente il manuale per evitare danni al prodotto, lesioni personali o invalidazione della garanzia. In caso di fastidio, dolore o peggioramento dei sintomi, consultare un professionista. Se necessario, farsi supervisionare da un adulto per assemblare e utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro. Non superare il limite di peso.
- Verificare regolarmente il corretto assemblaggio e, in caso di dubbi, contattare l'assistenza. Prima dell'uso, assicurarsi che le gambe del prodotto siano allineate e bloccate e interrompere l'utilizzo in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare il prodotto se non necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la durata. Non modificare il prodotto se non diversamente specificato nel manuale.
- Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando per rimuovere eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
- Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

IMPORTANTE

- 13) Non superare la capacità di carico massima.
- 14) Da utilizzare esclusivamente su vasche da bagno stabili e dotate di superfici piane su entrambi i lati.
- 15) Controllare regolarmente la presenza di segni di usura, danni o parti allentate.
- 16) Prima dell'uso, consultare il proprio medico per verificare che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il

parere medico.


ELENCO DEI COMPONENTI

Quando disimballate questo prodotto, verificate che siano incluse le parti elencate di seguito. e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se presenti Se un componente è mancante o danneggiato, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

NO	CODICE ARTICOL O	IMMAGIN E	QU ANT ITÀ	NO	CODICE ARTICOLO	IMMAGIN E	QUA NTIT À
# 1	Schienale		1	#6	Piede della sedia B		2
# 2	Tubo di collegame nto dello schienale		2	#7	Bracciolo		1
# 3	Ponte A		1	#8	Fibbia da doccia		1
# 4	Traliccio B		1	#9	Manuale		1

#5	Piede della sedia A		2				
----	---------------------	---	---	--	--	--	--

PARAMETRI DIMENSIONALI

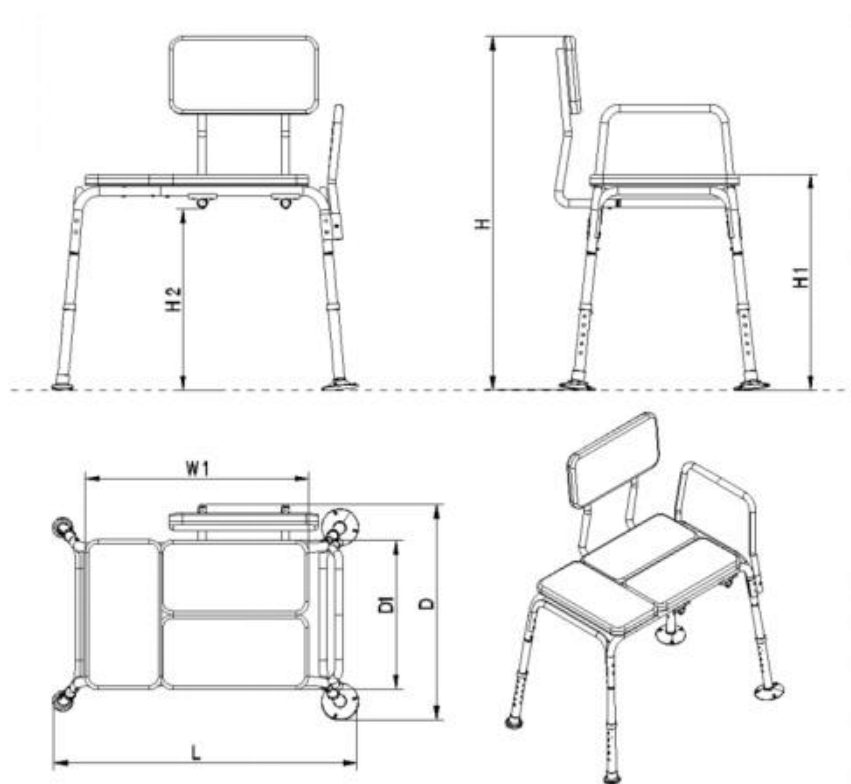

Unità: (mm/pollici)			
L	D	H	D1

800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32.3-36.6)	400(15.7)
W1	H1	H2	
600(23.6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5.2 - 19.7)	


※ Potrebbe esserci un errore di ± 20 mm nella misurazione di alcune dimensioni, il che è normale e non costituisce un problema di qualità del prodotto.

PARAMETRI



Modello	FBL630264
Materiali principali	Alluminio
Posto a sedere Carico nominale	227 kg/ 500 libbre

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Passaggio 1. Posizionare il cavalletto A e cavalletto B capovolto su un piano e inserire il cavalletto A in cavalletto B.

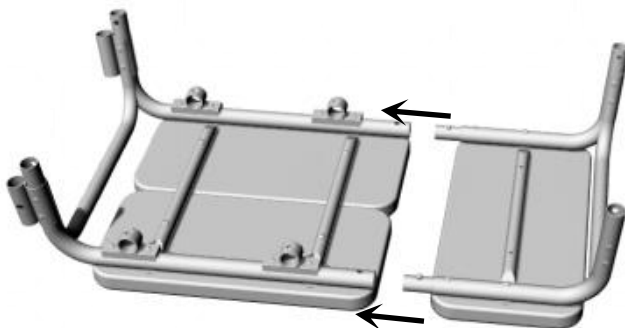


Passaggio 2. Inserire il gruppo piedini della sedia (A e B) nel poggiapiedi A e nel poggiapiedi B.

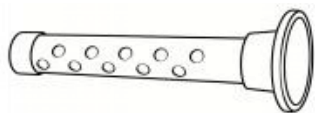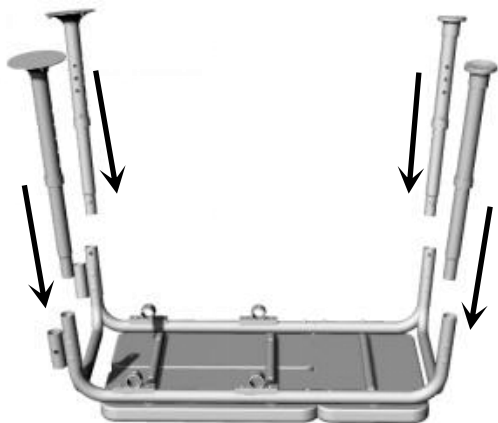

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Passaggio 3. Inserire il tubo di collegamento dello schienale nel gruppo dello schienale .

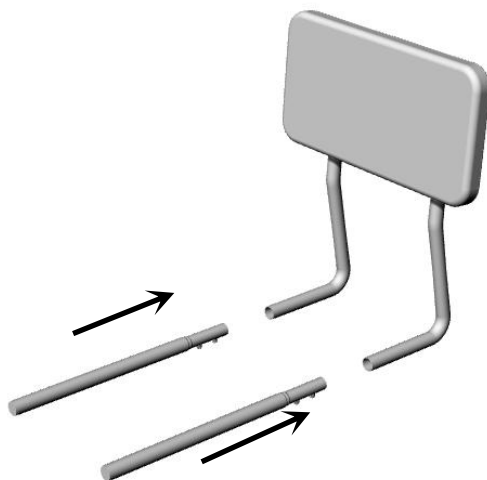

Passaggio 4. Inserire il gruppo dello schienale nel foro di supporto del tubo di collegamento sotto il sedile.



Passaggio 5. Inserire il bracciolo nel tubo del treppiede B.



Passaggio 6. Fissare la fibbia della doccia al bracciolo.



Livellamento



Se il tappetino non è posizionato in piano sul pavimento, ruotarlo fino a quando non sia completamente a contatto con la superficie.

ISTRUZIONI PER L'USO

SULL'UTILIZZO :

(37) Posizionare la panca per la doccia in modo stabile su una superficie piana.

(38)Prima dell'uso, assicurarsi che la vite sia serrata e che il perno a sfera delle gambe sia uscito dalla sua sede.

(39)Prima dell'uso, regolare la panca da doccia a un'altezza adeguata in modo che, quando le due gambe sono appoggiate nella vasca, la seduta risulti stabile.

(40) Verifica la stabilità della doccia Prima di utilizzare la panca , controllarla sempre. Interrompere l' uso se le gambe tremano o se la panca per la doccia è instabile.

(41)Evitate il sovraccarico.

(42)La panca della doccia non deve essere utilizzata per spingere l'utente seduto.

(43) La panca per la doccia deve essere utilizzata **ESCLUSIVAMENTE** per fare la doccia all'interno del bagno, non per altri scopi.

(44) Regolare le gambe della panca da doccia a un'altezza adeguata in modo che i piedi dell'utente, dalle dita ai talloni, tocchino comodamente il pavimento quando è seduto.

(45)Tenersi lontani dalle fiamme libere.

(46)Verificare periodicamente che le viti siano state serrate correttamente.

(47) Assicurati che i piedini in gomma alla base delle gambe del sedile doccia non siano usurati. In caso contrario, sostituiscili immediatamente.

(48)Leggere attentamente prima dell'uso e non strappare l'etichetta.

MANUTENZIONE

- lavare con acqua pulita o con sapone neutro e lasciare asciugare all'aria.
- Quando non in uso, conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Controllare regolarmente la zona doccia .

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

* Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto, per evitare il rischio di formazione di muffa .





Bancos de transferencia para bañera

Modelo: FBL630264

MODELO: FBL630264



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones

personales o daños a bienes valiosos.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

53. Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños derivados de una instalación errónea.

54. Tenga cuidado con el riesgo de pellizcos o cortes durante el montaje.

55. Evite que los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

56. Utilice gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

57. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

58. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.

59. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

60. Las funcionalidades del producto solo se aplican a un producto correctamente y completamente ensamblado.

61. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.

62. Este producto no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

63. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto es anormal antes de usarlo. Si es anormal, Por favor, deja de usarlo.

64. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

65. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las

páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.
Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

- Lea el manual completo para evitar daños, desperfectos en el producto o la pérdida de la garantía. Si experimenta molestias, dolor o un empeoramiento de los síntomas, consulte con un profesional. Si es necesario, solicite supervisión para el correcto y seguro montaje y uso del producto. No exceda el límite de peso.
- Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, póngase en contacto con el servicio de asistencia. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, y deje de usarlo si observa signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se indique en el manual.
- Tenga precaución durante el funcionamiento y el montaje. Evite temperaturas extremas y llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional sanitario.
- Limpiar regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuagando cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, secar completamente.
- No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

IMPORTANTE

- 17) No exceda la capacidad de peso máxima.
- 18) Únicamente apto para su uso en bañeras estables y con superficies planas en ambos lados.
- 19) Inspeccione periódicamente si hay signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
- 20) Antes de usar el producto, consulte con su médico para asegurarse de que

cumple con sus necesidades específicas. Las siguientes recomendaciones no sustituyen el consejo médico.


LISTA DE PIEZAS

Al desempaquetar este producto, compruebe que se incluyen las piezas que se enumeran a continuación. e inspeccione cuidadosamente si hay algún daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Si alguno Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	NÚMERO DE PIEZA	IMAGEN	CANTIDAD	NO	NÚMERO DE PIEZA	IMAGEN	CANTIDAD
# 1	Respaldo		1	#6	Pie de silla B		2
# 2	Tubo de conexión del respaldo		2	#7	Brazo		1
# 3	Caballote A		1	#8	Hebilla de ducha		1
# 4	Caballote B		1	#9	Manual		1

#5	Pie de silla A		2				
----	-------------------	---	---	--	--	--	--

PARÁMETROS DIMENSIONALES

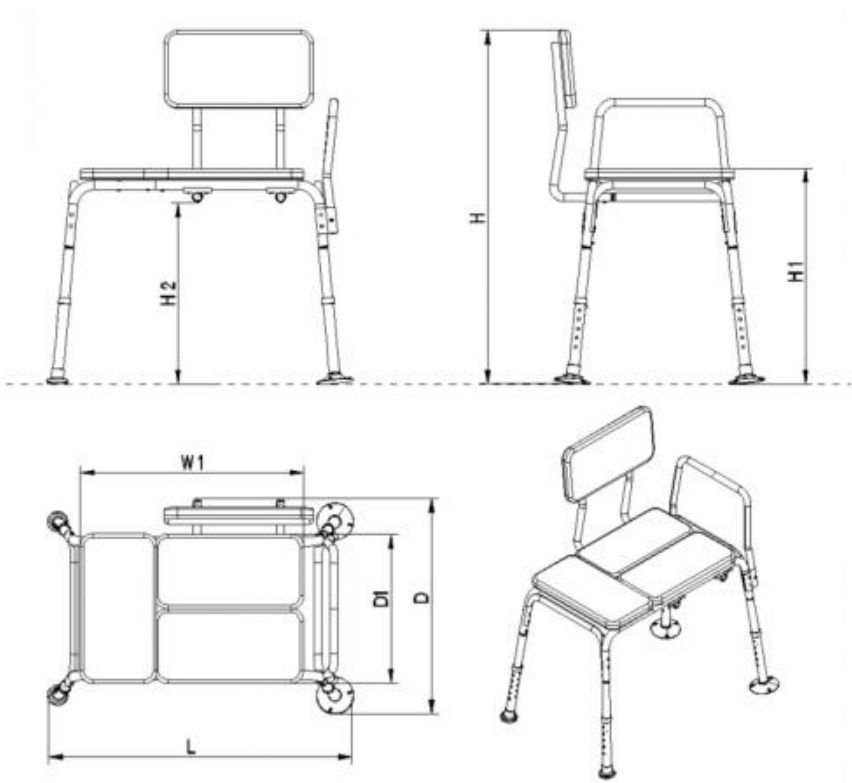

Unidad: (mm/pulg.)			
L	D	H	D1

800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20,9-21,3)	820-930 (32,3-36,6)	400(15.7)
W1	H1	H2	
600(23.6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5.2 - 19.7)	


※ Puede haber un margen de error de ± 20 mm en la medición de algunas dimensiones, lo cual es normal y no constituye un problema de calidad del producto.

PARÁMETROS



Modelo	FBL630264
Materiales principales	Aluminio
Asiento Carga nominal	227 kg/ 500 libras

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1. Colocar el caballete Un y un caballete B boca abajo en un plano, e insertar caballete A en caballete B.

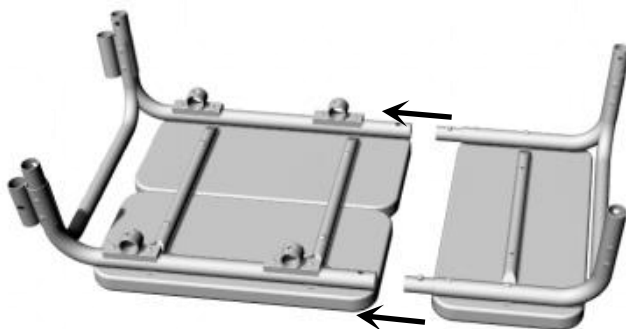


Paso 2. Inserte el conjunto de patas de la silla (A y B) en el soporte A y en el soporte B.

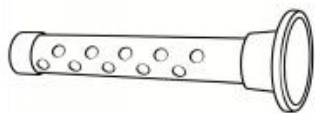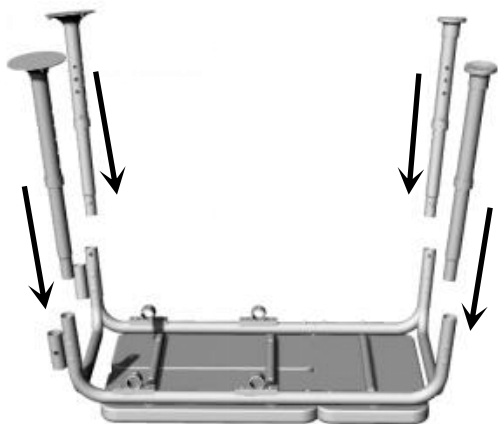

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Paso 3. Inserte el tubo de conexión del respaldo en el conjunto del respaldo .

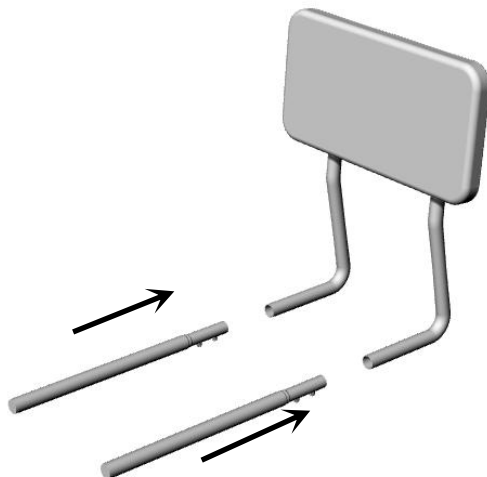

Paso 4. Inserte el conjunto del respaldo en el orificio de soporte del tubo de conexión debajo del asiento.



Paso 5. Inserte el reposabrazos . en el tubo del restle B.



Paso 6. Fije la hebilla de la ducha al reposabrazos .



Arrasamiento



Si la alfombrilla no está colocada completamente plana sobre el suelo, gírela hasta que esté en contacto total con el suelo.

INSTRUCCIONES DE USO

DE USO :

- (49) Coloca el banco de ducha de forma estable sobre un suelo plano.
- (50) Antes de usar, asegúrese de que el tornillo esté bien apretado y que el pasador de bola de las patas haya sido expulsado de la ranura.
- (51) Antes de usarla, ajuste el banco de ducha a una altura adecuada para que, cuando las dos piernas estén apoyadas en la bañera, el asiento quede liso.
- (52) Compruebe la estabilidad de la ducha . Asegúrese de que el banco esté firme antes de usarlo cada vez. Deje de usarlo si las patas tiemblan o si el banco de ducha es inestable.
- (53) Evita la sobrecarga.
- (54) El banco de ducha no debe utilizarse para empujar al usuario mientras está sentado.
- (55) El banco de ducha debe utilizarse ÚNICAMENTE para ducharse dentro del baño, y no para ningún otro propósito.
- (56) Ajuste las patas del banco de ducha a una altura adecuada para que los pies del usuario, desde los dedos hasta los talones, toquen cómodamente el suelo al sentarse.
- (57) Manténgase alejado de las llamas abiertas.
- (58) Compruebe periódicamente si los tornillos están bien apretados.
- (59) Asegúrese de que las puntas de goma en la parte inferior de las patas del banco de ducha no estén desgastadas. Si no lo están, reemplácelas inmediatamente.
- (60) Lea atentamente antes de usar y no arranque la etiqueta.

MANTENIMIENTO

- Lavar con agua limpia o con jabón suave y dejar secar al aire después de usar.
- Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Revise el banco de ducha con regularidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

* La tela debe almacenarse completamente seca, en un lugar limpio y seco para evitar el riesgo de moho .





Ławki transferowe do wanny

Model: FBL630264

MODEL: FBL630264



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

- 66. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji.
- 67. Zachowaj ostrożność ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia lub skaleczenia podczas montażu.
- 68. Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
- 69. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
- 70. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
- 71. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
- 72. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- 73. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
- 74. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- 75. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- 76. Prosimy o właściwe przechowywanie produktu. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest nieprawidłowy. Jeśli jest nieprawidłowy, Proszę zaprzestać jego

używania.

77. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i ostrzegaj przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

78. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

- Przeczytaj instrukcję obsługi w całości, aby uniknąć obrażeń, uszkodzenia produktu lub utraty gwarancji. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub nasilenia objawów, zasięgnij porady specjalisty. W razie potrzeby zapewnij nadzór, aby umożliwić prawidłowy i bezpieczny montaż i użytkowanie produktu. Nie przekraczaj limitu wagowego.
- Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Produkt jest przeznaczony do użytku na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozbieraj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Regularnie czyść łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz pozostałości mydła. Po umyciu dokładnie osusz.
- Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

WAŻNY

21) Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.

- 22) Do stosowania wyłącznie w wannach stabilnych, posiadających płaskie powierzchnie po obu stronach.
- 23) Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub luźnych części.
- 24) Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy produkt spełnia Państwa indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.


LISTA CZĘŚCI

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części . i dokładnie sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Jeśli takie istnieją, Jeśli jakaś część brakuje lub jest uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu.

NIE	NUMER CZĘŚCI	ZDJĘCIE	ILO ŚĆ	NIE	NUMER CZĘŚCI	ZDJĘCIE	ILO ŚĆ
# 1	Oparcie		1	#6	Noga krzesła B		2
# 2	Rura łącząca oparcie		2	#7	Podłokietnik		1
# 3	Koziół A		1	#8	Klamra prysznicowa		1

# 4	Kozioł B		1	#9	Podręcznik		1
#5	Stopa krzesła A		2				

PARAMETRY WYMIAROWE

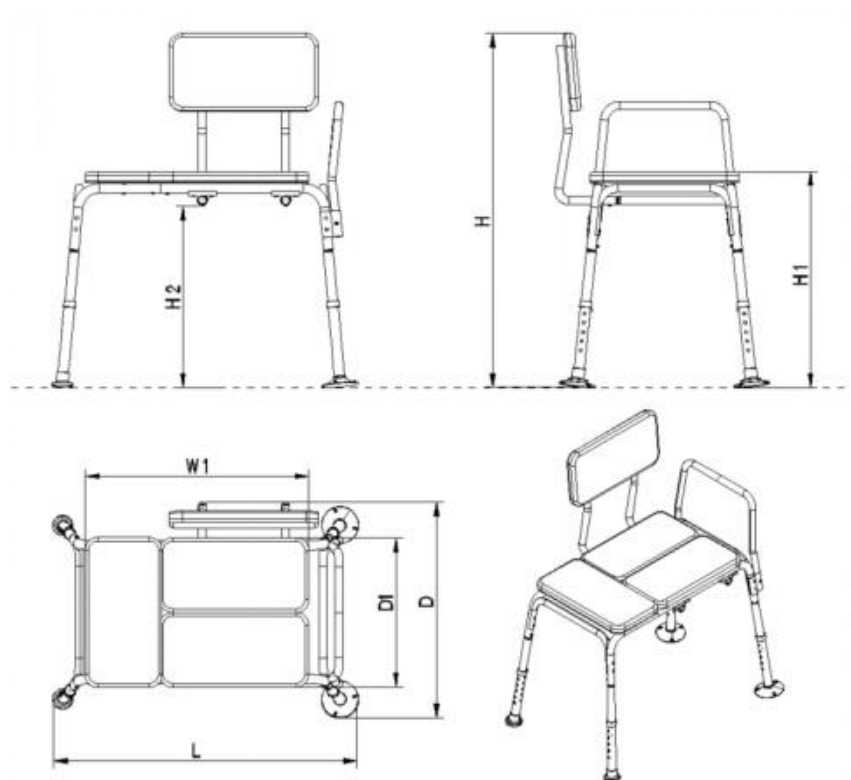

Jednostka: (mm/cal)			
L	D	H	D1
800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32,3-36,6)	400(15,7)
W1	H1	H2	
600(23,6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5,2 - 19,7)	

※ W pomiarach niektórych wymiarów może występować błąd wynoszący ± 20 mm, co jest normalne i nie świadczy o jakości produktu.


PAREMETRY

Model	FBL630264
-------	-----------


Główne materiały	Aluminium
Siedziba Obciążenie znamionowe	227 kg/ 500 funtów

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1. Umieść kozioł A i kozioł B do góry nogami na samolocie i włóż kozioł A do kozła B.

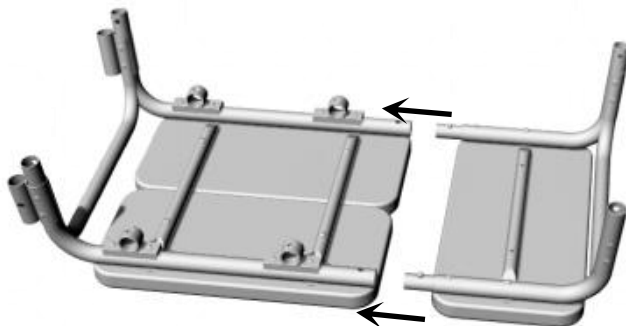


Krok 2. Włóż zespół stóp krzesła (A i B) do podpórki A i podpórki B.

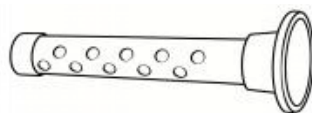

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Krok 3. Włóż rurę przyłączeniową oparcia do zespołu oparcia .

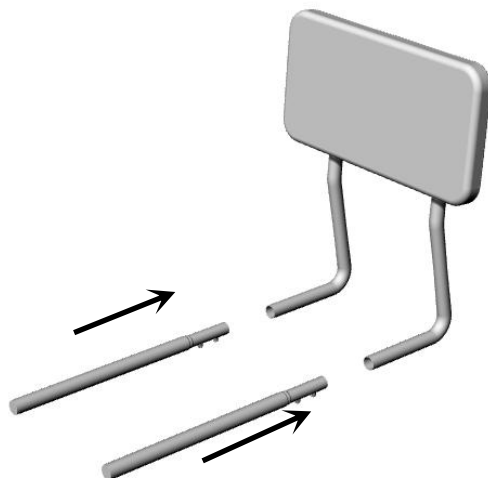

Krok 4. Włóż zespół oparcia do otworu podporowego rury przyłączeniowej pod siedziskiem.



Krok 5. Włóż podłokietnik do rury t restle B.



Krok 6. Zamocuj klamrę prysznicą do podłokietnika .



Niwelacja



Jeżeli mata nie leży płasko na podłożu, należy ją obrócić, aż będzie całkowicie przylegać do podłoża.

INSTRUKCJA UŻYCIA

DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

(61) Ustaw ławkę prysznicową stabilnie na płaskiej podłodze .

(62) Przed użyciem należy upewnić się, że śruba została dokręcona, a sworzeń kulowy nóg został wysunięty z gniazda.

(63) Przed użyciem należy ustawić odpowiednią wysokość ławki prysznicowej tak , aby po wsunięciu jej obu nóg do wanny siedzisko było gładkie.

(64) Sprawdź stabilność prysznica Przed każdym użyciem należy sprawdzić ławkę. Przestań jej używać, jeśli nogi się trzęsą lub ławka pod prysznicem jest niestabilna.

(65) Unikaj przeciążenia.

(66) Ławki pod prysznicem nie należy używać do popychania użytkownika siedzącego .

(67) Siedzisko prysznicowe powinno być używane TYLKO do brania prysznica wewnątrz łazienki. Nie może być używane do żadnych innych celów.

(68) Ustaw nogi ławki prysznicowej na odpowiedniej wysokości, tak aby stopy użytkownika, od palców po pięty, wygodnie dotykały podłogi podczas siedzenia na niej .

(69) Trzymaj się z dala od otwartego ognia.

(70) Okresowo sprawdzaj, czy śruby zostały dokręcone.

(71) Upewnij się , że gumowe końcówki u dołu nóg ławki prysznicowej nie są zużyte. Jeśli nie, natychmiast je wymień.

(72) Przed użyciem należy uważnie przeczytać etykietę i nie zrywać jej.

KONSERWACJA

- umyć czystą wodą lub łagodnym mydłem i wysuszyć na powietrzu.
- Jeśli nie jest używany, należy przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu.
- sprawdzaj stan blatu prysznicowego .

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

* Tkaninę należy przechowywać w całkowicie suchym, czystym i suchym miejscu, aby uniknąć ryzyka pojawienia się pleśni .





Badoverplaatsingsbanken

Model: FBL630264

MODEL: FBL630264



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

79. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onjuiste installatie.
80. Wees voorzichtig met het risico op beknelling of snijwonden tijdens de montage.
81. dit product gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
82. en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .
83. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
84. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
85. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
86. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.
87. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
88. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
89. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer voor gebruik of het product defect is. Als het defect is, Stop alsjeblieft met het gebruik ervan.
90. Gebruik het product volgens het beoogde doel en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

91. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

- Lees de handleiding volledig door om letsel, productschade of het vervallen van de garantie te voorkomen. Raadpleeg een arts als u ongemak, pijn of verergering van uw symptomen ervaart. Schakel indien nodig een toezichthouder in om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken. Overschrijd de maximale belasting niet.
- Controleer regelmatig of de montage goed is en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de poten van het product recht staan en vergrendeld zijn voordat u het gebruikt, en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, beschadiging of ontbrekende onderdelen zijn. Het product dient op een vlakke, stabiele ondergrond te worden gebruikt. Demonteer het product niet als dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product kan verkorten. Wijzig het product niet, tenzij dit in de handleiding staat vermeld.
- Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen en open vuur. Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als er een allergische reactie optreedt.
- Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water en spoel eventuele zeepresten af. Droog na het reinigen grondig af.
- Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

BELANGRIJK

- 25) Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
- 26) Uitsluitend te gebruiken op stabiele badkuipen met vlakke oppervlakken aan beide zijden.
- 27) Controleer regelmatig op slijtage, beschadigingen of losse onderdelen.
- 28) Controleer voor gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw specifieke

behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.


ONDERDELENLIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn. en controleer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan. Indien er Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

NEE	ONDERDEELNUMMER	AFBEELDING	AANTAL	NEE	ONDERDEELNUMMER	AFBEELDING	AANTAL
# 1	Rugleuning		1	#6	Stoelpoot B		2
# 2	Verbinding sbuis voor rugleuning		2	#7	Armleuning		1
# 3	Schoorsteen A		1	#8	Douchegesp		1
# 4	Schoorsteen B		1	#9	Handmatig		1

#5	Stoelpoot A		2				
----	----------------	---	---	--	--	--	--

DIMENSIONALE PARAMETERS

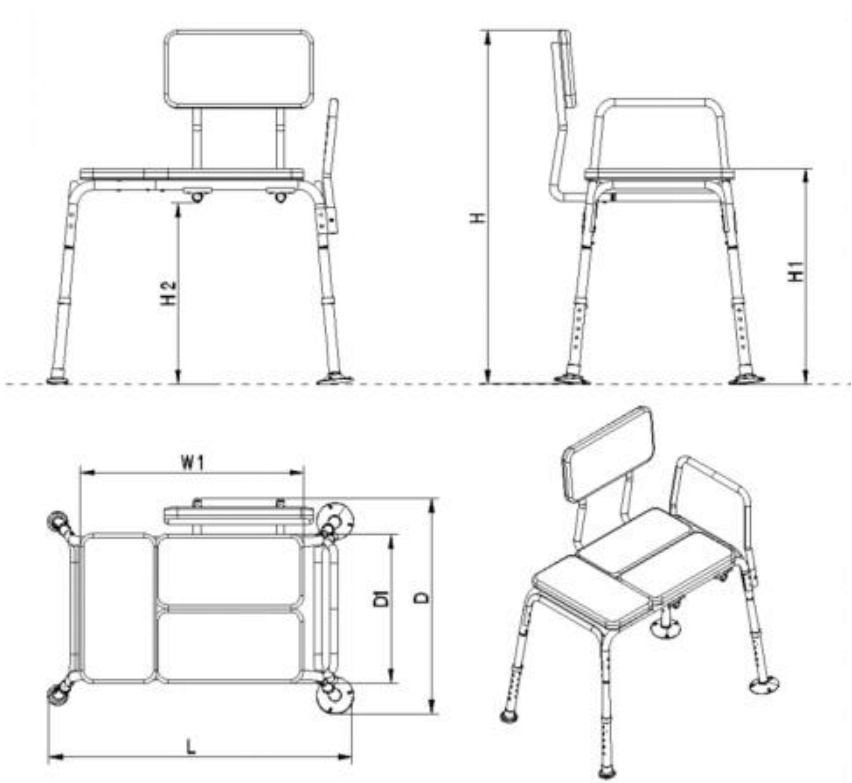

Eenheid: (mm/inch)			
L	D	H	D1

800-810 (31,5-31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32.3-36.6)	400(15.7)
W1	H1	H2	
600(23.6)	485 - 600 (19.1 -2 3.6)	385 - 500 (1 5.2 - 19.7)	


※ Bij sommige afmetingen kan een meetfout van ± 20 mm voorkomen. Dit is normaal en geen probleem met de productkwaliteit.

PAREMETERS



Model	FBL630264
Belangrijkste materialen	Aluminium
Stoel Nominale belasting	227 kg / 500 lbs

INSTALLATIE- INSTRUCTIES

Stap 1. Plaats de schraag . A en schraag B ondersteboven op een vlak, en plaats een steunbalk. Een in een schraag B.

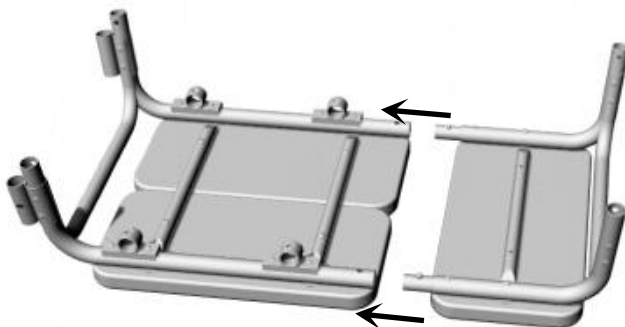


Stap 2. Plaats de stoelpoten (A en B) in de schraag A en de schraag B.

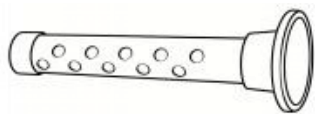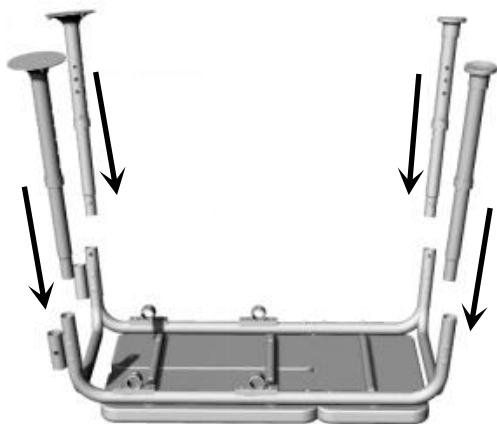

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Stap 3. Steek de verbindingbuis van de rugleuning in de rugleuningconstructie .

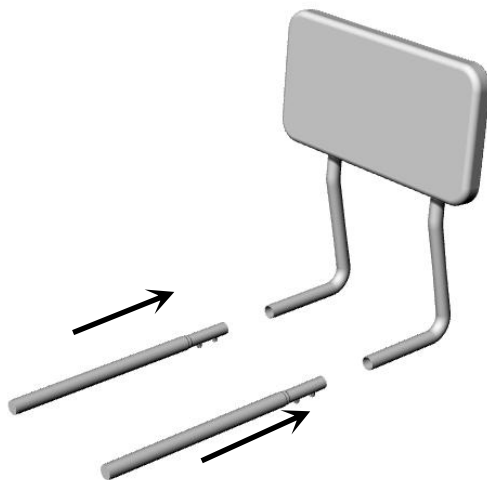

Stap 4. Plaats de rugleuning in het steungat van de verbindingsbuis onder de zitting.



Stap 5. Plaats de armleuning . in de
pijp van t restle B.



Stap 6. Bevestig de douchegeesp aan de
armleuning .



Nivellering



Als de voetmat niet plat op de grond ligt, draai hem dan totdat hij volledig contact maakt met de grond.

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSWAARSCHUWING :

(73) Plaats de douchebank stabiel op een vlakke ondergrond .

(74)Controleer voor gebruik of de schroef goed is vastgedraaid en of de kogelpen van de poten uit de gleuf is gekomen.

(75)Stel de douchebank vóór gebruik in op de juiste hoogte , zodat de zitting vlak is wanneer de twee poten in het bad rusten.

(76) Controleer de stabiliteit van de douche . Controleer de douchebank voor elk gebruik. Stop met het gebruik als de poten wiebelen of de douchebank instabiel is.

(77)Vermijd overbelasting.

(78)De douchebank mag niet worden gebruikt om de gebruiker , zittend, voort te duwen .

(79) De douchebank mag UITSLUITEND gebruikt worden om in de badkamer te douchen , niet voor andere doeleinden.

(80) Stel de poten van de douchebank in op een geschikte hoogte, zodat de voeten van de gebruiker, van tenen tot hielen, comfortabel de vloer raken wanneer hij of zij erop zit.

(81)Blijf uit de buurt van open vuur.

(82)Controleer regelmatig of de schroeven goed vastgedraaid zijn.

(83) Zorg ervoor dat de rubberen dopjes aan de onderkant van de poten van de douchebank niet versleten zijn. Zo ja, vervang ze dan onmiddellijk .

(84)Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door en scheur het etiket niet af.

ONDERHOUD

- Was het na gebruik met schoon water of een mild sopje en laat het aan de lucht drogen.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats wanneer het niet in gebruik is.
- Controleer de douchebank regelmatig .

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

* De stof moet volledig droog en op een schone, droge plaats worden bewaard om schimmelvorming te voorkomen .





Förflyttningsbänkar för badkar

Modell: FBL630264

MODELL: FBL630264



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

92. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid skador på grund av felaktig installation.
93. Var försiktig med risken för klämskador eller skärskador under monteringen.
94. Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .
95. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .
96. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
97. Håll åskådare borta från området under monteringen.
98. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
99. Produktegenskaperna gäller endast en korrekt och fullständigt monterad produkt.
100. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
101. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
102. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är onormal före användning. Om den är onormal, snälla sluta använda den.
103. Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.
104. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monterings schemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING:

- Läs hela manualen för att undvika skada, produktskador eller att garantin inte gäller. Sök professionell hjälp om du upplever obehag, smärta eller förvärrade symtom. Om det behövs, använd övervakning för att montera och använda produkten korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.
- Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.
- Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta sjukvårdspersonal.
- Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj bort eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.
- Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

VIKTIG

- 29) Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
- 30) Endast för användning på badkar som är stabila och har plana ytor på båda sidor.
- 31) Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage, skador eller lösa delar.
- 32) Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.


DELLISTA

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med. och noggrant kontrollera om det finns några skador som kan ha uppstått under

transporten. Om en del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda produkten.

ING A	ARTIKEL NUMMER	BILD	ANT AL	ING A	ARTIKELNUMMER	BILD	ANT AL
# 1	Ryggstöd		1	#6	Stolsfot B		2
# 2	Ryggstöds anslutning srör		2	#7	Armstöd		1
# 3	Bock A		1	#8	Duschspänne		1
# 4	Bock B		1	#9	Manuell		1
#5	Stolsfot A		2				

DIMENSIONELLA PARAMETRAR

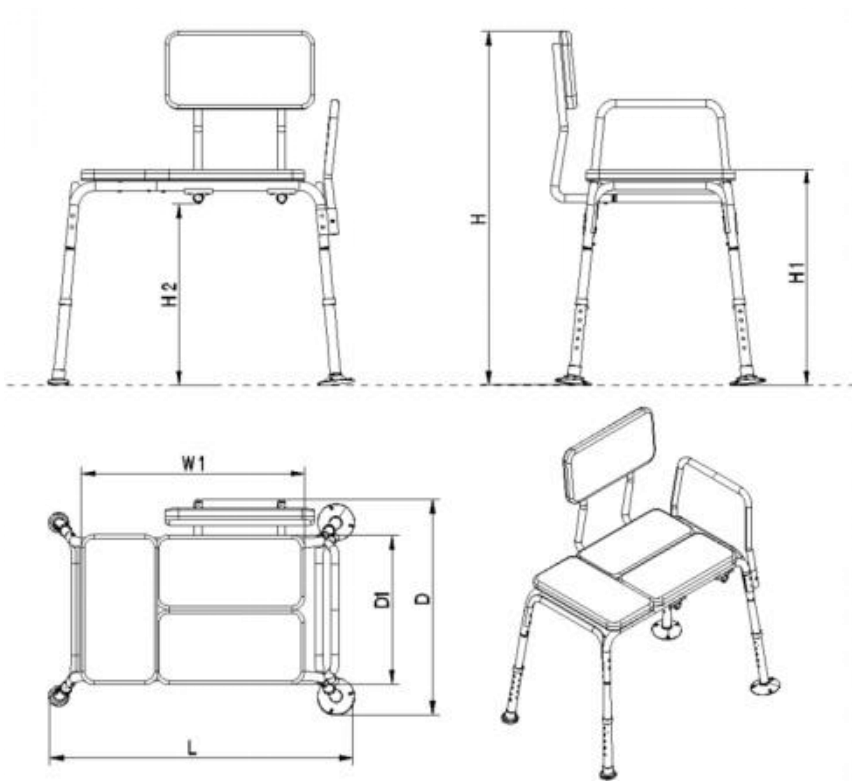

Enhet: (mm/tum)			
L	D	H	D1
800-810 (31,5 - 31,9)	530-540 (20.9-21.3)	820-930 (32,3 - 36,6)	400 (15,7)
W1	H1	H2	

600 (23,6)	485 - 600 (19,1 - 23,6)	385 - 500 (15,2 - 19,7)	
------------	------------------------------	------------------------------	--


※ Det kan finnas ett mätfel på ± 20 mm för vissa dimensioner, vilket är normalt och inte ett problem med produktkvaliteten.

PARAMETRAR



Modell	FBL630264
Huvudmaterial	Aluminium
Plats Nominell belastning	227 kg / 500 lbs

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Steg 1. Placera bocken A och bock B upp och ner på ett plan och sätt in bocken A in i bocken B.

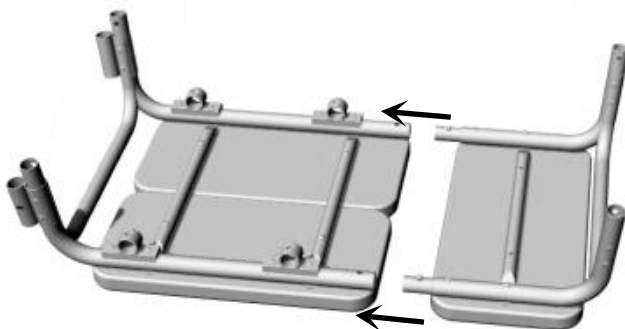


Steg 2. Sätt i stolsfoten (A och B) i böjningen A och böjningen B.

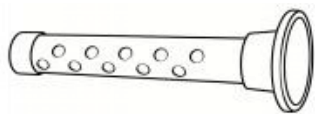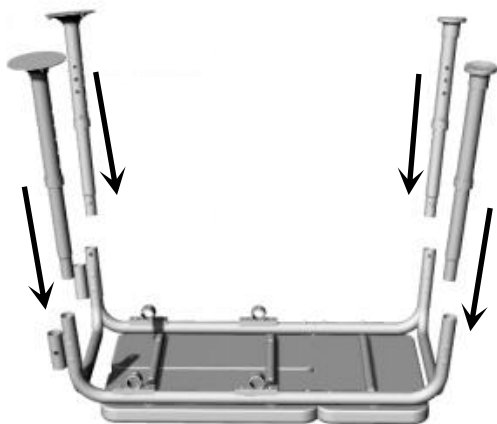

The chair legs are adjustable in 10 gears, and users can adjust the position of the chair leg ball hole to meet the height requirements of the seat.

Steg 3. Sätt i ryggstödet anslutningsrör i ryggstödet .

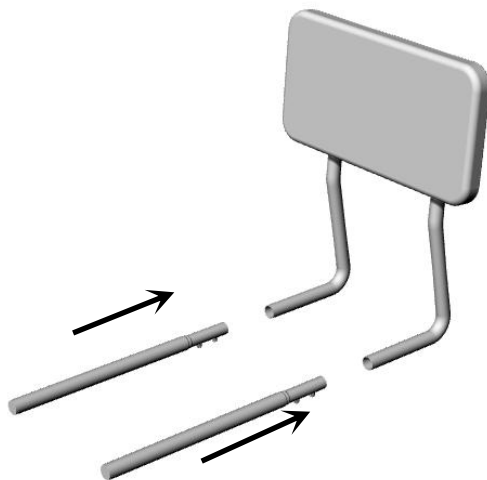

Steg 4. Sätt i ryggstödsenheten i stödhålet på anslutningsröret under sitsen.



Steg 5. Sätt i armstödet in i röret till t restle B.



Steg 6. Fäst duschspännet på armstödet .



Utgjämning



Om fotmattan inte ligger platt på marken, rotera den tills den har helt kontakt med marken.

BRUKSANVISNINGAR

ANVÄNDNING AV VARNING:

(85) Placera duschbänken stabilt på ett plant golv .

(86)Före användning, se till att skruven är åtdragen och att benens kulstift har lossnat ur spåret.

(87)Justera duschbänken till lämplig höjd före användning så att sitsen är slät när de två benen stöds i badkaret .

(88) Kontrollera duschens stabilitet bänken innan du använder den varje gång. Sluta använda den om benen skakar eller om duschbänken är instabil.

(89)Undvik överbelastningen.

(90)Duschbänken bör inte användas för att knuffa användaren sittande .

(91) Duschbänken får ENDAST användas för att duscha inne i badrummet, inte för några andra ändamål.

(92) Justera duschbänkens ben till lämplig höjd så att användarens fötter från tår till häl bekvämt nuddar golvet när man sitter på den .

(93)Håll dig borta från öppna lågor.

(94)Kontrollera regelbundet om skruvarna har dragits åt.

(95) Se till att gummilisterna längst ner på duschbänkens ben inte är slitna. Om inte, byt ut dem omedelbart .

(96)Läs noggrant före användning och riv inte av etiketten.

UNDERHÅLL

- Tvätta med rent vatten eller milt tvålwater och lufttorka efter användning.
- När den inte används, förvara den svalt och torrt
- Kontrollera duschbänken regelbundet .

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

* Tyget bör förvaras helt torrt, på en ren och torr plats för att undvika risk för mögel .

