

JKGQEC-000300, JKGQEC-000200, JKGQEC-000100, JKGQEC-000000 平面防水防滑洗澡椅-蓝色
平面防水防滑洗澡椅-橙色 凹槽防水防滑洗澡椅-蓝色
(偏 eBay) 凹槽防水防滑洗澡椅-橙色 (偏 eBay) 安
装说明通用版 英语

K1350fx 开发与编辑部/翻译需求to编辑部 (开发对接文案专用) 20240208启用/张甜/JKGQEC-000300 JKGQEC-000200 JKGQEC-000100 JKGQEC-000000 中文安装说明.png

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	开发 填写 (需求方填写) PS: 这里是老品的优化需求, 新品未刊登的不要往里面填												
2	需求提交时间	部门	需求提交团队	提交人	SKU	产品名称	需求交付标准	需求类型	具体优化及需求点	文案语种 (不默认英语)	需求详细补充	产品二级类目 (排需求交付优先级)	样品采购数量
1350	2024/9/23	开发部-成都	成都组-马连	肖熙	JKGQEC-000300	平面防水防滑洗澡椅-蓝色	按样品交付	说明书翻译	纯文案翻译	英语	开发与编辑部	医疗器械	
1351	2024/9/23	开发部-成都	成都组-马连	肖熙	JKGQEC-000200	平面防水防滑洗澡椅-橙色	按样品交付	说明书翻译	纯文案翻译	英语	开发与编辑部	医疗器械	
1352	2024/9/23	开发部-成都	成都组-马连	肖熙	JKGQEC-000100	凹槽防水防滑洗澡椅-蓝色	按样品交付	说明书翻译	纯文案翻译	英语	开发与编辑部	医疗器械	
1353	2024/9/23	开发部-成都	成都组-马连	肖熙	JKGQEC-000000	凹槽防水防滑洗澡椅-橙色	按样品交付	说明书翻译	纯文案翻译	英语	开发与编辑部	医疗器械	

JKGQEC-000300 JKGQEC-000200 JKGQEC-000100 JKGQEC-000000 中文安装说明.png

扫码观看安装视频



折叠平板洗澡椅 折叠U型私处清洗洗澡椅 折叠坐便/洗澡双用款

洗澡椅安装说明



1) 椅子调节高度时需按下脚管上的按钮, 上下伸缩脚管即可调节椅子的高度



2) 找到脚管, 弹珠靠中间的地方, 按下弹珠弹出脚管。



3) 把短的2只脚管安装在椅子的前腿上, 前腿带2个白色的盖子, 塞进去后调节到最低档位。



4) 把长的2只脚管安装在椅子的后腿上, 后腿带2个中空套, 安装时需用力插入, 弹珠弹出即可。



5) 安装好脚管后, 打开椅子, 椅子扶手处左右2边有管收折的开关, 开关弹出即锁止。



6) 椅子收合折叠时需同时按下扶手2边的收合开关按钮, 人站在椅子的后面, 向上提椅子的前部即可折叠。


JKGQEC-000300, JKGQEC-000200, JKGQEC-000100, JKGQEC-000000 □□□□□□□□-□□ □□□□□□□□-□□
□□□□□□□□-□□□□eBay□□□□□□□□□□-□□□□eBay□□□□□□□□ □□

Shower Chair Installation Instructions



Two views of a metal rod with orange caps and a red arrow pointing to a hole. The top view shows the rod with a red arrow pointing to a hole. The bottom view shows the rod without the arrow.

2. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Locate the leg tube, at the center of the marble, and press down on the marble to pull out the leg tube.

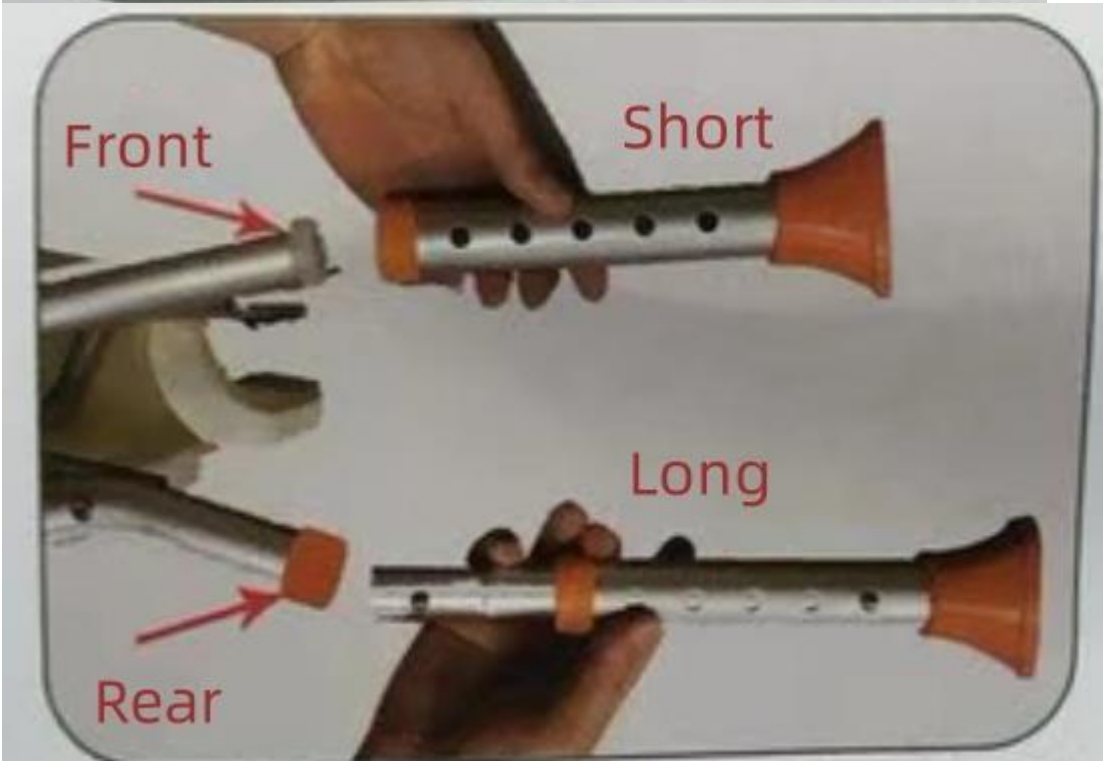

3. □□□2□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□, □□□□□□□□□□□□


Attach the 2 short leg tubes to the front legs of the chair with 2 white plugs, insert them and adjust them to the lowest position.




□ □ □

A diagram of a graduated cylinder with a blue stopper on the left and a blue pouring spout on the right. The cylinder has a scale with 10 major markings. A red arrow points to the 4th major marking from the left, which is labeled '4'.

1. To adjust the height of the chair, you need to press the button on the leg tube, and then extend and retract the leg tube up and down to adjust the height of the chair.

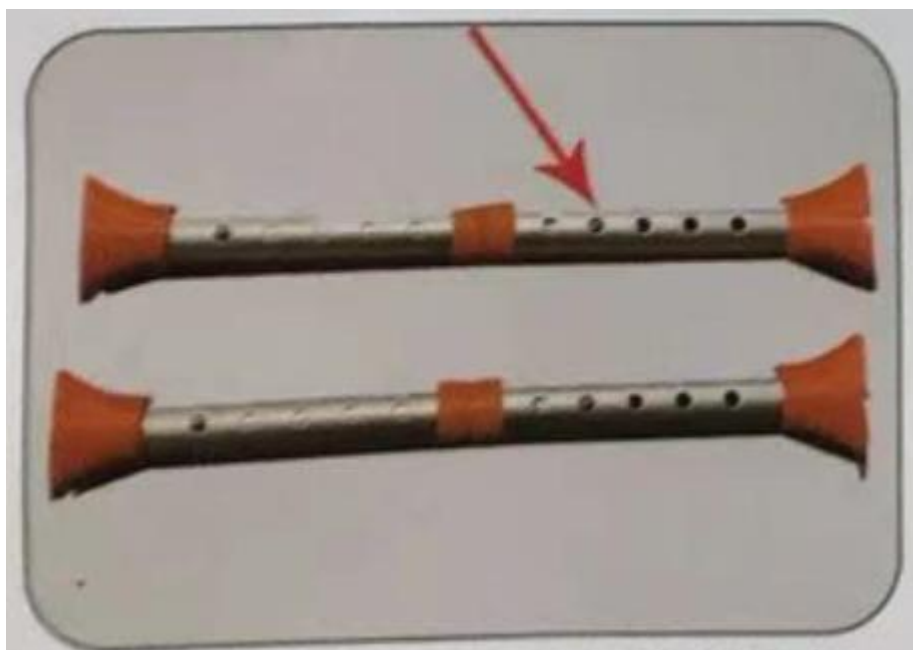

2. Locate the leg tube, at the center of the marble, and press down on the marble to pull out the leg tube.

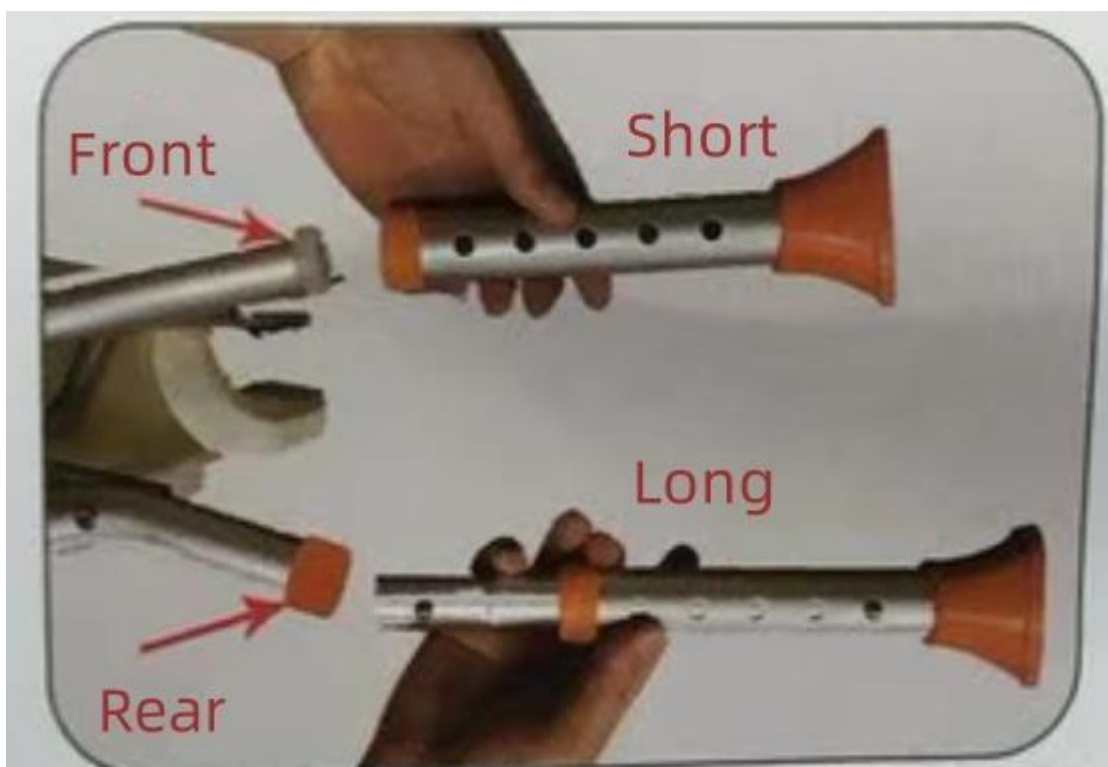

3. Attach the 2 short leg tubes to the front legs of the chair with 2 white plugs, insert them and adjust them to the lowest position.



4. Install the 2 long leg tubes on the back legs of the chair with 2 hollow sleeves and mount them with a firm push-in until the marble pops out.



5. With the leg tubes installed, open the chair. There are switches on the left and right sides of the armrest for folding the tubes, which will lock when they pop out.



6. To fold the chair, press the folding switch buttons on both sides of the armrests at the same time. Stand behind the chair and lift the front of the chair upwards to fold it.