

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTED DRIVING

MODEL:FBL825308

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
ASSISTED DRIVING

MODEL: FBL825308



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. We hope the company's products and services will bring you the same courtesy.

Pay attention

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual; misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

Manufacturer's liability

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

Guarantee

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment(except parts) are in regular use and repair condition, free of manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

PRECAUTIONS

Precautions for use

Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.

9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS


Product Name	Standard assisted driving
model	FBL825308
Load bearing capacity/lb	350lbs

PRODUCT COMPONENTS

1		Left main frame	1	2		Right main frame	4
---	---	-----------------------	---	---	--	---------------------	---

INSTALLATION STEPS

1.As shown in the figure: Use force to pull the left and right handrails apart on both sides, then insert the foot tube assembly into the hole on the right side of the main frame, align it with the hole position, and press the marble inward until it pops out.

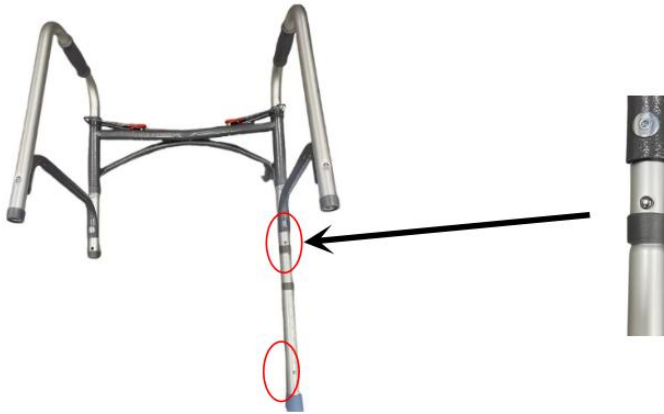

2.As shown in the figure: Insert the remaining three foot tubes into the main frame according to the operation in step 1.



3.As shown in the figure: Press and hold the red button with one finger, while using the other hand to hold the handle and apply force towards the inside of the main frame to fold the armrest, and operate the other armrest the same way. After folding, it is shown in the following figure.



Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CONDUITE ASSISTÉE STANDARD

MODÈLE : FBL825308

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
CONDUITE ASSISTÉE

MODÈLE : FBL825308



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Préface

Tout d'abord, permettez-nous d'exprimer nos sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement. Ce manuel est destiné au service client pour mieux écrire avec cet équipement. J'espère que les produits et services de l'entreprise vous apporteront la courtoisie du canal.

Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel. L'utilisation abusive de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation. La Société ne donne aucune garantie d'aucune sorte, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte à la Société à des fins particulières. Garanties implicites d'adéquation.

La société décline toute responsabilité. La société ne sera pas tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages accidentels ou consécutifs résultant de la fourniture, de l'exécution ou de l'utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par la loi sur les brevets. Tous droits réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel ne peut être photocopié, copié ou traduit en tout ou en partie dans une autre langue.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

Responsabilité du fabricant

La Société ne sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances de l'équipement que si l'opération de montage, de retour, d'amélioration et d'entretien sont effectués par du personnel agréé par la Société, si l'équipement électrique concerné est conforme aux normes nationales et si l'équipement est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Garantie

Procédé de fabrication et matières premières : La Société garantit que

l'équipement (à l'exception des pièces) est en état d'utilisation et de réparation régulier, exempt de défauts de processus de fabrication et de matières premières pendant un an à compter de la date de l'expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

PRÉCAUTIONS

Précautions d'emploi

Avertissement:

1. Si l'équipement semble lâche, tombe ou est endommagé, veuillez contacter le entreprise dans le temps;
2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres invitent accidents.
3. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions seront vous faire perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser en compagnie de votre famille ou de vos amis. amis.
5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser. quand le corps n'est pas en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLETS, QUE LE FREIN SOIT SENSIBLE ET ASSEMBLER L'ENSEMBLE DU PRODUIT EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS.
7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS AVEC DE L'EAU ET SÉCHER DANS LE TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT A RAYURES ET CHUTES, DES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉ À TEMPS POUR OBTENIR LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.
8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉ POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS LA ENVIRONNEMENT EN PENTE.

9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DU SIÈGE
LA PLAQUE EST VERROUILLÉE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Nom du produit	Conduite assistée standard
modèle	FBL825308
Capacité de charge/lb	350 livres

COMPOSANTS DU PRODUIT

1		Gauche principal cadre	1	2		Main droite cadre	4
---	---	------------------------------	---	---	--	----------------------	---

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Comme indiqué sur la figure : utilisez la force pour séparer les mains courantes gauche et droite des deux côtés, puis insérez l'ensemble du tube de pied dans le trou sur le côté droit du cadre principal, alignez-le avec la position du trou et appuyez sur le marbre vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il sorte.

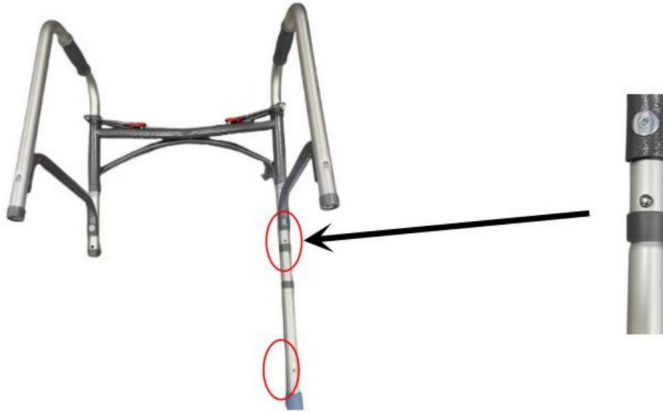

2. Comme indiqué sur la figure : insérez les trois tubes de pied restants dans le cadre principal conformément à l'opération de l'étape 1.



3. Comme indiqué sur la figure : appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé avec un doigt, tout en utilisant l'autre main pour tenir la poignée et appliquer une force vers l'intérieur du cadre principal pour replier l'accoudoir, puis actionnez l'autre accoudoir de la même manière. Une fois plié, il est illustré sur la figure suivante.



Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et service client par e-mail convivial 24 heures sur 24.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté Yumin

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122

Australie


Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

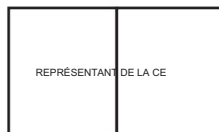

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

STANDARDASSISTENTES FAHREN

MODELL:FBL825308

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**STANDARD
ASSIERTES FAHREN**

MODELL: FBL825308



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

Vorwort

Zunächst möchten wir unseren herzlichsten Dank an unsere Kunden aussprechen, die unsere Geräte gekauft haben. Dieses Handbuch dient unserem Kundenservice und soll den Umgang mit diesen Geräten verbessern. Wir hoffen, dass Ihnen die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens mit freundlicher Genehmigung des Kanals dienen.

Passt auf

Dieses Produkt muss streng gemäß der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungsmethode verwendet werden. Der Missbrauch jeglicher anderer Methoden ist auf Missbrauch zurückzuführen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Garantien jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) die dem Unternehmen für einen bestimmten Zweck angebotene Marktgängigkeit oder stillschweigende Garantien bezüglich der Eignung.

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für in diesem Material enthaltene Fehler oder für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung, tatsächlichen Ausführung oder Verwendung dieses Handbuchs ergeben.

Dieses Handbuch enthält patentrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist es nicht gestattet, dieses Handbuch zu fotokopieren, zu vervielfältigen oder Teile davon in eine andere Sprache zu übersetzen.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung an den Benutzer geändert werden.

Haftung des Herstellers

Das Unternehmen übernimmt nur dann die Verantwortung für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Leistung der Geräte, wenn Montage, Rückgabe, Verbesserung und Wartung durch vom Unternehmen autorisiertes Personal erfolgen, die betreffenden elektrischen Geräte den nationalen Normen entsprechen und die Geräte entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Garantie

Herstellungsverfahren und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass
Die Ausrüstung (außer Teile) ist in normalem Gebrauchs- und Reparaturzustand, frei von
Herstellungsprozess- und Rohstofffehler für ein Jahr ab dem Datum
der Lieferung. Keine unserer Inspektionen ist perfekt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Warnung:

1. Wenn sich das Gerät locker anfühlt, herunterfällt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Unternehmen rechtzeitig;
2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche laden Unfälle.
3. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, Ablenkungen werden kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
4. Bei normalem Gebrauch bitte in Begleitung von Familie oder Freunde.
5. Verwenden Sie es angemessen entsprechend Ihrer eigenen Situation und übertreiben Sie es nicht wenn der Körper nicht rechtzeitig in der Lage ist.
6. VOR DEM GEBRAUCH BITTE ÜBERPRÜFEN, OB DIE KOMPONENTEN SIND VOLLSTÄNDIG, OB DIE BREMSE EMPFINDLICH IST UND MONTIEREN SIE DAS GESAMTE PRODUKT UNTER STRENGER EINHALTUNG DIE ANLEITUNG.
7. REINIGUNGSMITTEL MÜSSEN MIT WASSER GEWASCHEN WERDEN UND TROCKNEN SIE RECHTZEITIG. WENN DIE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG DES PRODUKTS KRATZER UND FÄLLT AB, REPARATURMATERIALIEN MÜSSEN Bei rechtzeitiger Anwendung wird die beste Rostschutzwirkung erzielt.
8. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DAS HINTERRAD DES PRODUKTES VERRIEGELT, UM EIN VERSCHIEBEN ZU VERMEIDEN, WENN DER BENUTZER IM ABGEFALLENE UMGEBUNG.

9. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER KLAPPMECHANISMUS DES SITZES
BEI VERWENDUNG DIESES PRODUKTS IST DIE PLATTE GESPERRT.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER


Produktname	Standardmäßiges assistiertes Fahren
Modell	FBL825308
Tragfähigkeit/lb	350 Pfund

PRODUKTKOMPONENTEN

1		Links hauptsächlich rahmen	1	2		Rechtes Haupt rahmen	4
---	---	----------------------------------	---	---	--	-------------------------	---

INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Wie in der Abbildung gezeigt: Ziehen Sie den linken und rechten Handlauf auf beiden Seiten mit Kraft auseinander, stecken Sie dann die Fußrohrbaugruppe in das Loch auf der rechten Seite des Hauptrahmens, richten Sie sie an der Lochposition aus und drücken Sie die Murren nach innen, bis sie herauspringt.

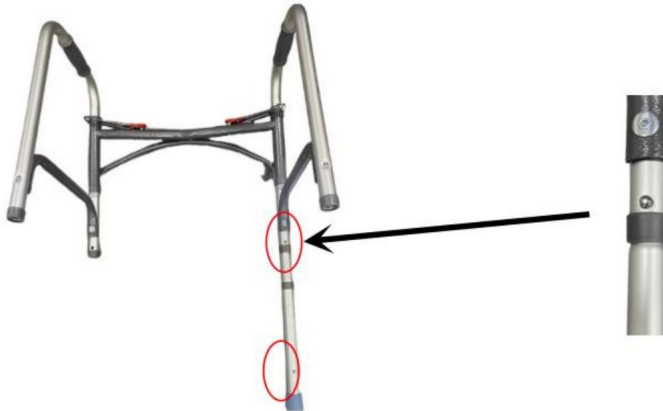

2. Wie in der Abbildung gezeigt: Setzen Sie die restlichen drei Fußrohre gemäß der Vorgehensweise in Schritt 1 in den Hauptrahmen ein.



3. Wie in der Abbildung gezeigt: Drücken und halten Sie den roten Knopf mit einem Finger, während Sie mit der anderen Hand den Griff halten und Kraft in Richtung der Innenseite des Hauptrahmens ausüben, um die Armlehne umzuklappen. Betätigen Sie die andere Armlehne auf die gleiche Weise. Nach dem Umklappen ist es in der folgenden Abbildung dargestellt.



Guter Service: 100 % getestet vor Verlassen des Werks und rund um die Uhr freundlicher E-Mail-Kundenservice.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

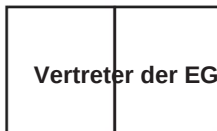

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

GUIDA ASSISTITA STANDARD

MODELLO:FBL825308

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

GUIDA ASSISTITA

MODELLO: FBL825308



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Prefazione

Innanzitutto, desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti ai clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è stato scritto per aiutare il servizio clienti a migliorare l'uso di questa attrezzatura. Ci auguriamo che i prodotti e i servizi dell'azienda vi offrano la cortesia del canale.

Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo d'uso descritto nel presente manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio.

La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta alla Società per uno scopo particolare. Garanzie implicite di idoneità.

La società non accetta alcuna responsabilità. La Società non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale, o per eventuali danni accidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso di questo manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, non è consentito fotocopiare, copiare o tradurre alcuna parte di questo manuale in un'altra lingua.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

Responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità delle prestazioni dell'attrezzatura solo se le operazioni di montaggio, restituzione, miglioramento e manutenzione vengono eseguite da personale approvato dalla Società, l'attrezzatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'attrezzatura viene utilizzata in conformità alle istruzioni operative.

Garanzia

Processo di fabbricazione e materie prime: La Società garantisce che l'attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, priva di difetti del processo di fabbricazione e delle materie prime per un anno dalla data della spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

PRECAUZIONI

Precauzioni per l'uso

Avvertimento:

1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare il
azienda nel tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie invitano
incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento, le distrazioni saranno
farti perdere il controllo.
4. Durante l'uso normale, utilizzare con l'accompagnamento della famiglia o
amici.
5. Utilizzare ragionevolmente in base alla propria situazione e non abusare
quando il corpo non è in tempo.
6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE SE I COMPONENTI
SONO COMPLETI, SIA CHE IL FRENO SIA SENSIBILE, E
ASSEMBLARE L'INTERO PRODOTTO NEL RISPETTO PIENO DELLE NORME
LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E
ASCIUGARE NEL TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO HA
GRAFFI E CADUTE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE
UTILIZZATO NEL TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA
BLOCCATO PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE NELLA
AMBIENTE IN PENDENZA.

9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI RIPIEGAMENTO DEL SEDILE
LA PIASTRA È BLOCCATA QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Nome del prodotto	Guida assistita standard
modello	FBL825308
Capacità di carico/libbra	350 libbre

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1		Sinistra principale telaio	1	2		Diritto principale telaio	4
---	---	----------------------------------	---	---	--	------------------------------	---

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Come mostrato nella figura: usare forza per separare i corrimano sinistro e destro su entrambi i lati, quindi inserire il gruppo del tubo del piede nel foro sul lato destro del telaio principale, allinearlo con la posizione del foro e premere la biglia verso l'interno finché non fuoriesce.

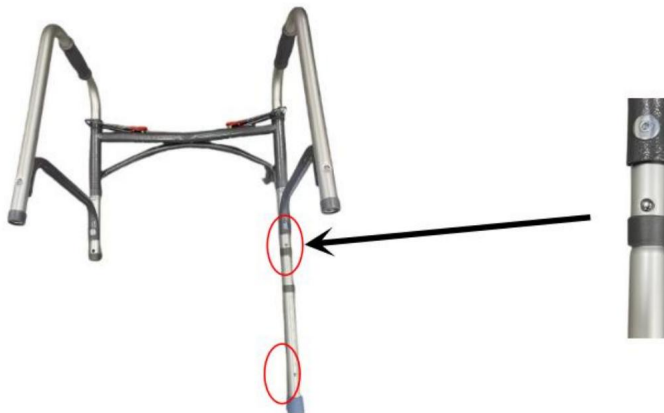

2. Come mostrato nella figura: inserire i restanti tre tubi da piede nel telaio principale seguendo l'operazione descritta nel passaggio 1.



3. Come mostrato nella figura: premere e tenere premuto il pulsante rosso con un dito, mentre si usa l'altra mano per tenere la maniglia e applicare forza verso l'interno del telaio principale per ripiegare il bracciolo e azionare l'altro bracciolo allo stesso modo. Dopo la piegatura, è mostrato nella figura seguente.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e servizio clienti cordiale via e-mail 24 ore su 24.

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

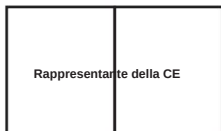

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

CONDUCCIÓN ASISTIDA ESTÁNDAR

MODELO:FBL825308

Seguimos comprometidos a brindar herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTÁNDAR
CONDUCCIÓN ASISTIDA

MODELO: FBL825308



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Prefacio

En primer lugar, permítanos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han adquirido nuestro equipo. Este manual es para el servicio al cliente para hacer un mejor uso de este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa le brinden el canal de cortesía.

Prestar atención

Este producto debe utilizarse en estricta conformidad con el método de uso de este manual. El mal uso de cualquier otro método causado por un uso indebido del mismo. La Compañía no otorga garantía de ningún tipo, incluyendo (pero no limitado a) la comercialización ofrecida a la Compañía para un propósito particular. Garantías implícitas de idoneidad.

La empresa no asume ninguna responsabilidad. La empresa no será responsable de ningún error que pueda contener este material ni de ningún daño accidental o consecuente que resulte de la provisión, el desempeño real o el uso de este manual.

Este manual contiene información confidencial protegida por la ley de patentes. Reservados todos los derechos. No se permite fotocopiar, copiar ni traducir ninguna parte de este manual a otro idioma sin el consentimiento por escrito de la empresa.

El contenido incluido en este manual puede modificarse sin previo aviso al usuario.

Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del funcionamiento del equipo solo si las operaciones de montaje, devolución, mejora y mantenimiento son realizadas por personal aprobado por la Compañía, el equipo eléctrico en cuestión cumple con las normas nacionales y el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de operación.

Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La Empresa garantiza que

El equipo (excepto las piezas) se encuentra en condiciones normales de uso y reparación, libre de defectos en el proceso de fabricación y en las materias primas durante un año a partir de la fecha del envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

PRECAUCIONES

Precauciones de uso

Advertencia:

1. Si el equipo se afloja, se cae o está dañado, comuníquese con el compañía en el tiempo;
2. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan accidentes.
3. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, ya que pueden producirse distracciones. hacer que pierdas el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo con el acompañamiento de familiares o amigos. amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar. cuando el cuerpo no esta en el momento oportuno.
6. ANTES DE USAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN COMPLETOS, YA SEA SENSIBLE EL FRENO, Y MONTAR TODO EL PRODUCTO EN ESTRICTO ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECAR A TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL DEL PRODUCTO TIENE RASGUÑOS Y CAÍDAS, ES NECESARIO REPARAR MATERIALES UTILIZADO A TIEMPO PARA LOGRAR EL MEJOR EFECTO ANTIÓXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADO PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN EL ENTORNO PENDIENTE.

9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DEL ASIENTO
LA PLACA ESTÁ BLOQUEADA AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Nombre del producto	Conducción asistida estándar
modelo	FBL825308
Capacidad de carga/lb	350 libras

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1		Izquierda principal marco	1	2		Principal derecha marco	4
---	---	---------------------------------	---	---	--	----------------------------	---

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Como se muestra en la figura: use la fuerza para separar los pasamanos izquierdo y derecho en ambos lados, luego inserte el conjunto del tubo del pie en el orificio del lado derecho del marco principal, alinéelo con la posición del orificio y presione la canica hacia adentro hasta que salga.

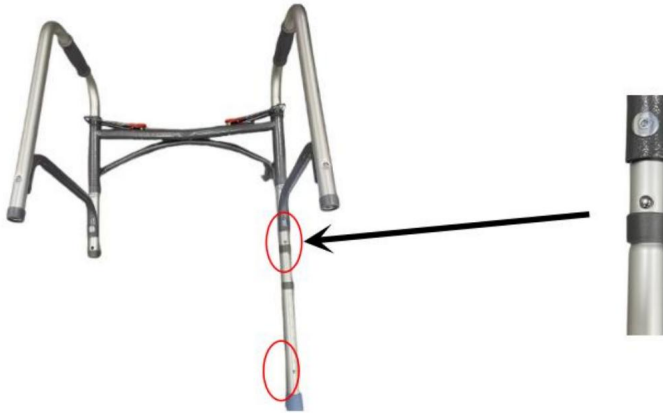

2. Como se muestra en la figura: Inserte los tres tubos de pie restantes en el marco principal de acuerdo con la operación del paso 1.



3. Como se muestra en la figura: Mantenga presionado el botón rojo con un dedo, mientras usa la otra mano para sostener el mango y aplicar fuerza hacia el interior del marco principal para plegar el apoyabrazos y opere el otro apoyabrazos de la misma manera. Después de plegarlo, se muestra en la siguiente figura.



Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y servicio al cliente por correo electrónico amigable las 24 horas.


Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

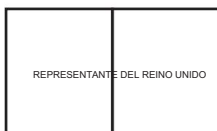

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

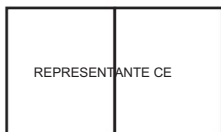

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

STANDARDOWE WSPOMAGANIE JAZDY

MODEL:FBL825308

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
WSPOMAGANE JAZDY

MODEL: FBL825308



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Przedmowa

Przed wszystkim chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność klientom, którzy zakupili nasz sprzęt. Niniejsza instrukcja ma na celu ulepszenie obsługi klienta w odniesieniu do tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi naszej firmy przyniosą Ci uprzejmość.

Uważać na

Ten produkt musi być używany ściśle według sposobu użytkowania opisanego w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie jakichkolwiek innych metod jest spowodowane niewłaściwym użyciem. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, w tym (ale nie wyłącznie) wartości rynkowej produktu oferowanego Spółce w określonym celu. Domniemane gwarancje przydatności.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale ani za jakiegokolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z dostarczenia, faktycznego wykonania lub użycia tej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem patentowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Spółki, niniejszej instrukcji nie wolno kserować, kopiować ani tłumaczyć żadnej jej części na inny język.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność działania sprzętu wyłącznie w przypadku, gdy montaż, obsługa, zwrot, udoskonalenie i konserwacja są przeprowadzane przez personel zatwierdzony przez Spółkę, dany sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi i jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Spółka gwarantuje, że

Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie nadającym się do normalnego użytkowania i naprawy, wolny od wady procesu produkcyjnego i surowców przez okres jednego roku od daty przesyłki. Żadna z naszych inspekcji nie jest idealna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie:

1. Jeśli sprzęt wydaje się luźny, spada lub jest uszkodzony, skontaktuj się z firmą na czas;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagrożone lub ciemne obszary zapraszają Wypadki.
3. Podczas obsługi urządzenia trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od siebie, gdyż mogą one rozprasać uwagę. spowodować utratę kontroli.
4. Podczas normalnego użytkowania należy korzystać z urządzenia w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, zgodnie z własną sytuacją i nie nadużywaj gdy organizm nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY SKŁADNIKI SĄ SĄ KOMPLETNE, CZY HAMULEC JEST CZUŁY, I ZMONTUJ CAŁY PRODUKT ŚCIŚLE ZGODNIE Z INSTRUKCJE.
7. PRODUKTY CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ WODĄ I WYSCHNIE W CZASIE. JEŚLI POWIERZCHNIA POWŁOKI PRODUKTU ZOSTAŁA ZARYSOWANIA I ODPADNIĘCIA, MATERIAŁY DO NAPRAWY MUSZĄ BYĆ STOSOWANE NA CZAS W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZEGO EFEKTU ANTYRODZOWEGO.
8. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁO PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE, ABY UNIKNĄĆ ZEŚLIZGANIA, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE W ŚRODOWISKO POCHYLE.

9. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA SIEDZISKA JEST DZIAŁAJĄCY
PODCZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU PŁYTA JEST ZABLOKOWANA.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU


Nazwa produktu	Standardowe wspomaganie jazdy
model	FBL825308
Nośność/funt	350 funtów

SKŁADNIKI PRODUKTU

1		Lewy główny rama	1	2		Prawa strona główna rama	4
---	---	------------------------	---	---	--	-----------------------------	---

KROKI INSTALACJI


1. Jak pokazano na rysunku: Użyj siły, aby rozsunąć lewą i prawą poręcz po obu stronach, następnie włóż rurę podstawy do otworu po prawej stronie ramy głównej, wyrównaj ją z otworem i wciśnij kulę do środka, aż wyskoczy.

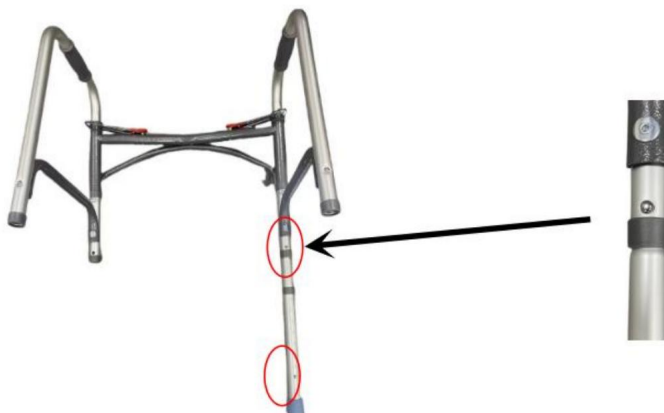

2. Jak pokazano na rysunku: Włóż pozostałe trzy rury stopowe do ramy głównej zgodnie z procedurą opisaną w kroku 1.



3. Jak pokazano na rysunku: Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk jednym palcem, a drugą ręką przytrzymaj uchwyt i przyłóż siłę do wnętrza ramy głównej, aby złożyć podłokietnik, a następnie w ten sam sposób obsługuj drugi podłokietnik. Po złożeniu jest to pokazane na poniższym rysunku.

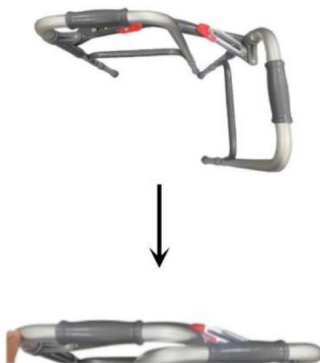

Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i całodobowa, przyjazna obsługa klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,

Dom Centuriona, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

STANDAARD BEHULPZAAM RIJDEN

MODEL:FBL825308

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDAARD

BEGELEID RIJDEN

MODEL: FBL825308



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die onze apparatuur hebben gekocht. Deze handleiding is bedoeld om de klantenservice die met deze apparatuur is geschreven, te verbeteren. We hopen dat de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid brengen.

Let op

Dit product moet strikt volgens de gebruiksmethode in deze handleiding worden gebruikt. Misbruik van andere methoden kan het gevolg zijn van misbruik. Het bedrijf geeft geen enkele garantie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die het bedrijf biedt voor een bepaald doel. Impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, of voor accidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, feitelijke uitvoering of het gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd is door patentrecht. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf mag deze handleiding niet worden gefotokopieerd, gekopieerd of vertaald in een andere taal.

De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het Bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de prestaties van de apparatuur als de montage, het retourneren, de verbetering en het onderhoud worden uitgevoerd door door het Bedrijf goedgekeurd personeel, de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen en de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het bedrijf garandeert dat de apparatuur (behalve onderdelen) verkeert in normale gebruiks- en reparatieconditie, vrij van fabricageproces en fouten in de grondstoffen gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

VOORZORGSMaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Waarschuwing:

1. Als het apparaat los aanvoelt, valt of beschadigd is, neem dan contact op met de bedrijf in de tijd;
2. Zorg dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik, er kunnen afleidingen zijn. ervoor zorgen dat u de controle verliest.
4. Gebruik het bij normaal gebruik met begeleiding van familie of vrienden. vrienden.
5. Gebruik het op een redelijke manier, afhankelijk van uw eigen situatie, en overdrijf het niet. wanneer het lichaam niet op tijd is.
6. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN ZIJN VOLLEDIG, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER HET GEHELE PRODUCT STRIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.
7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN MET WATER WORDEN GEWASSEN EN DROOG OP TIJD. ALS DE OPPERVLAKECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN EN VALLLEN, REPARATIEMATERIALEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT OP TIJD GEBRUIKT OM HET BESTE ANTI-ROEST EFFECT TE BEREIKEN.
8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT VERGRENDELD OM SCHUIVEN TE VOORKOMEN WANNEER DE GEBRUIKER IN DE HELLENDE OMGEVING.

9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE STOEL
DE PLAAT IS VERGRENDELD BIJ GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS


Productnaam	Standaard ondersteund rijden
model	FBL825308
Draagvermogen/lb	350 pond

PRODUCTCOMPONENTEN

1		Links voornaamst kader	1	2		Rechts hoofd kader	4
---	---	------------------------------	---	---	--	-----------------------	---

INSTALLATIESTAPPEN

1. Zoals weergegeven in de afbeelding: Gebruik kracht om de linker- en rechterleuning aan beide kanten uit elkaar te trekken en plaats vervolgens de voetbuisconstructie in het gat aan de rechterkant van het hoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat en druk de knikker naar binnen totdat deze eruit springt.

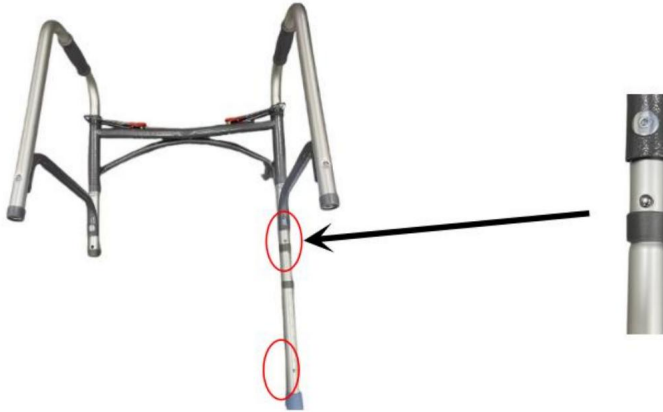

2. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats de overige drie voetbuizen in het hoofdframe volgens de procedure in stap 1.



3. Zoals weergegeven in de afbeelding: Houd de rode knop met één vinger ingedrukt, terwijl u met de andere hand de hendel vasthoudt en kracht uitoefent op de binnenkant van het hoofdframe om de armsteun in te klappen, en bedien de andere armsteun op dezelfde manier. Na het vouwen wordt dit weergegeven in de volgende afbeelding.



Uitstekende service: 100% getest voordat het product de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke klantenservice via e-mail.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL825308

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL825308



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Förord

Först och främst, låt oss uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Denna manual är till för att kundtjänst ska bli bättre. Skriven med denna utrustning. Hoppas att företagets produkter och tjänster ger dig kanalen artighet.

Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, missbruk av andra metoder orsakade av felaktig användning. Företaget ger ingen garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds företaget för en särskilt ändamål. Underförstådda garantier med lämplighet.

Bolaget tar inget ansvar. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta material, eller för eventuella oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av tillhandahållande, faktisk prestanda eller användning av denna manual.

Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter reserverade. Utan företagets skriftliga medgivande är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk.

Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten av utrustningens prestanda endast om montering, återlämning, förbättring och underhåll utförs av personal som godkänts av företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.

Garanti

Tillverkningsprocess och råvaror: Företaget garanterar det
Utrustningen (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationsskick, fri från
tillverkningsprocess och råvarufel i ett år från datumet
av sändningen. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder för användning

Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad, vänligen kontakta
företag i tid;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder
olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta medan du arbetar, distraktioner kommer att göra det
få dig att tappa kontrollen.
4. Under normal användning, använd tillsammans med familjen eller
vänner.
5. Rimligt använda efter ens egen situation, och överanvänd inte
när kroppen inte är i rätt tid.
6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA
ÄR KOMPLETTA, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH
MONTERA HELA PRODUKTEN ENLIGT ENLIGT
INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH
TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEläggning HAR
REPAR OCH FALLAR AV, REPARATIONSMATERIAL MÅSTE FINNAS
ANVÄNDS I TID FÖR ATT UPPNÅ DEN BÄSTA ANTIROSTEFFFEKTEN.
8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR
LÅST FÖR ATT UNDVIKA ATT GLIDDA NÄR ANVÄNDAREN BLIR I DEN
SLUTANDE MILJÖ.

9. KONTROLLERA ATT SITSSENS VÄCKNINGSMEKANISM
PLATEN ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR


Produktnamn	Standard assisterad körning
modell	FBL825308
Bärförmåga/lb	350 pund

PRODUKTKOMPONENTER

1		Vänster huvud ram	1	2		Höger huvud ram	4
---	---	-------------------------	---	---	--	--------------------	---

INSTALLATIONSSTEG

1. Som visas i figuren: Använd kraft för att dra isär vänster och höger ledstång på båda sidor, för sedan in fotrörsenheten i hålet på höger sida av huvudramen, rikta in den med hålpositionen och tryck på marmor inåt tills den hoppar ut.

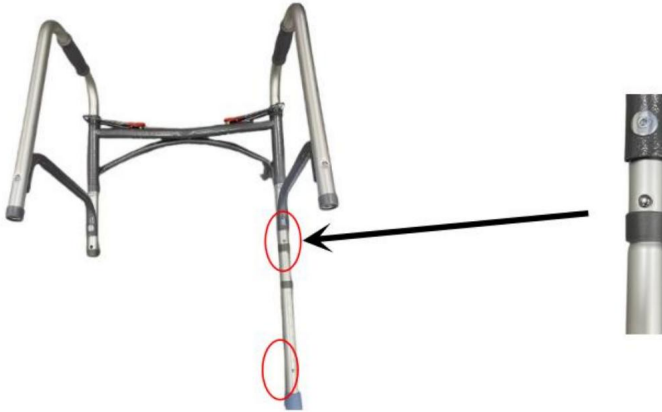

2. Som visas i figuren: Sätt i de återstående tre fotrören i huvudramen enligt anvisningarna i steg 1.



3. Som visas i figuren: Tryck och håll den röda knappen med ett finger, medan du använder den andra handen för att hålla i handtaget och applicera kraft mot insidan av huvudramen för att fälla armstödet och manövrera det andra armstödet på samma sätt. Efter vikning visas det i följande bild.



Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-postkundservice.

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adress: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support