VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


THRESHOLD RAMP

USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

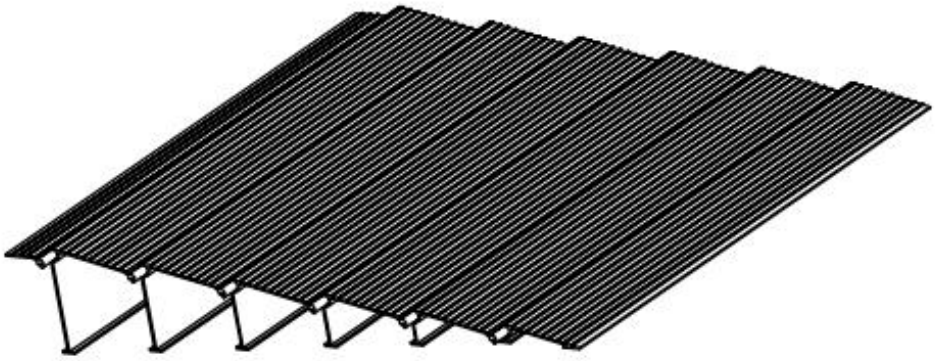

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Safety Instructions

WARNING:

Carefully read and understand instructions and procedures before installing and using the threshold ramp.

Do not modify the threshold ramp design.

- Do not move a threshold ramp while standing on it.
- Do not use it in bad weather, such as wind, rain, snow, and so on. It is recommended to use the ladder in clear weather.

1. During installation, please wear gloves to prevent hand injuries.
2. Do not stack items or allow children to play on the ramp.
3. Regularly check the structure and fasteners of the ramp to ensure its stability and safety.
4. If the surface of the ramp is worn or damaged, please replace or repair it in time.

5 The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

7. The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

2. Maintenance Guide

1. Place the product on a sturdy, secure, accessible, and level starting point. The minimum weight capacity of the starting point must be equal to that of the ramp (800 lbs). Do not exceed the maximum weight capacity of the product.

2. Ensure that the product is securely flush against the starting point. If a safe, accessible, and level starting point cannot be found, or if the product does not fit securely against a higher starting point, do not use the ramp.

3.Do not tamper with, attempt to repair, or modify any part of the product. Exercise caution to avoid pinch points during assembly and handling.
4. If using the product with other mobility equipment, refer to the user guide of the equipment to understand the acceptable usage guidelines, including appropriate slope, incline, and chair direction. Do not exceed the recommendations of the mobility equipment.
5. Before each use, carefully inspect the fasteners on the ramp to ensure they are not loose. Tighten any loose fasteners if necessary.
6. When using the ramp, ensure it is securely flush against the starting point to ensure safety.
7. Before each use, clean the ramp surface of ice, snow, dust, leaves, and other debris. Remove accumulated ice and snow, and sweep the surface clean. For dust and debris, use a soft bristle brush and non-alkaline detergent to clean the ramp surface, then rinse thoroughly.
8. The ramp surface may become slippery in wet conditions. Walk with caution and pay attention to your footing to prevent slipping.
9. If the ramp will not be used for an extended period, store it in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

3. Product Description and Main Features

The threshold interlocking aluminum alloy ramp is made of high-quality aluminum alloy extrusion. This product is durable and provides convenience for people. It is lightweight, portable, stable, and durable and features an interlocking design for easy installation and storage.

- Main Features:

1. Material: High-strength aluminum alloy, extruded.
2. Surface: Anti-slip treatment, deburring.
3. Interlocking design: Each section’s interface is precisely designed; align each section's interface and push them together for installation.
4. Load limit: Up to 800 lbs.
5. Height optional: suitable for thresholds of different heights.

4. Product Parameter

Item	Model	Picture	Height	Load Limit	N.W	G.W
1	LD9YV0		1inch	800lbs	1.5kg	1.9kg
2	LYIMV0		2inch	800lbs	2.7kg	3.2kg
3	Z2UAV0		3inch	800lbs	4.0kg	4.5kg
4	GRBRV0		4inch	800lbs	5.45kg	6.0kg
5	OVUSV0		5inch	800lbs	7.05kg	7.95g
6	SNPTV0		6inch	800lbs	8.6kg	9.56kg

5. Installation Guide

(1) Before starting the installation, please wear gloves to protect your hands.

(2) Choose an appropriate installation location, ensuring that the ground is level and firm.

(3) Align and interlock each section of the ramp together until all parts are even.

(4) Starting with the 1” extension, install the threshold extensions in the order shown (FIG. 1) until the final height is reached. Bring the threshold extensions together at an approximate 45° angle, then rotate them into place after the bulb is engaged in the slot.

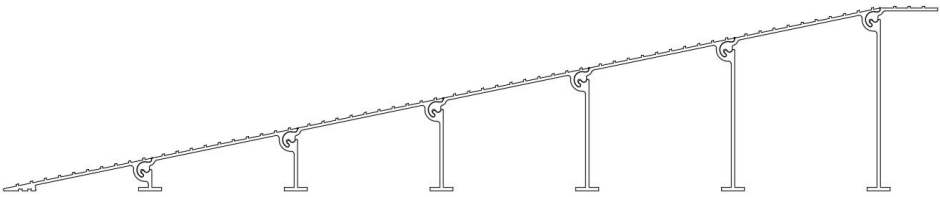


FIG.1


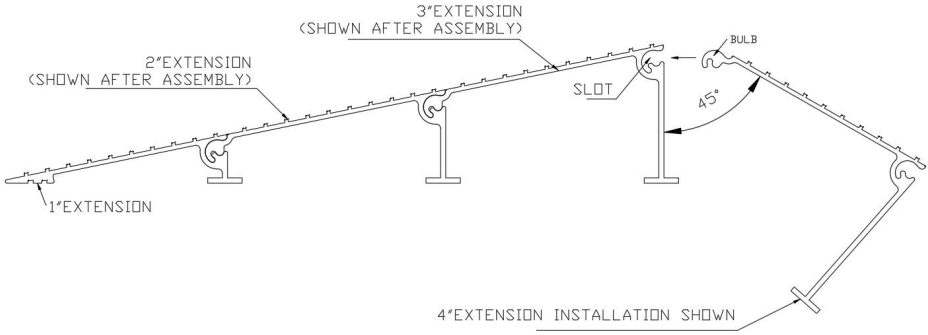



FIG.1

(5)Use the provided screws to tighten each section of the ramp to ensure that the ramp does not slip out or make noise during use.

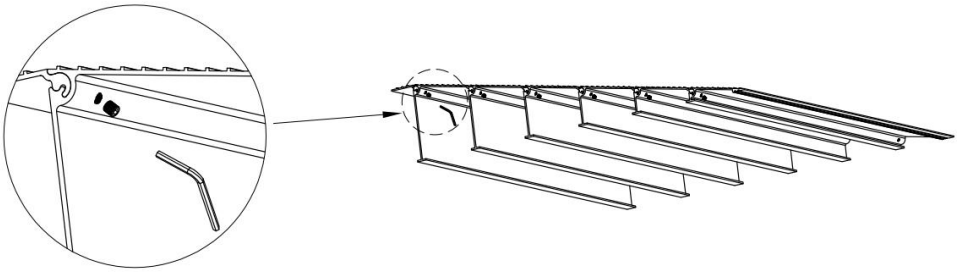

(5) After installation, check whether the ramp is stable and tightly attached to the ground.

(6) When using the ramp, push the equipment up and down the ramp steadily, avoiding sharp turns or speeding.

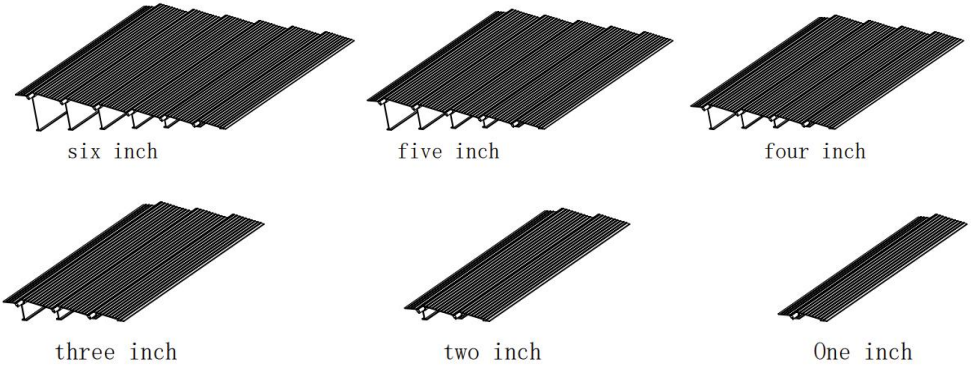



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SEUIL RAMPE

MANUEL D'UTILISATION

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modèle : LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

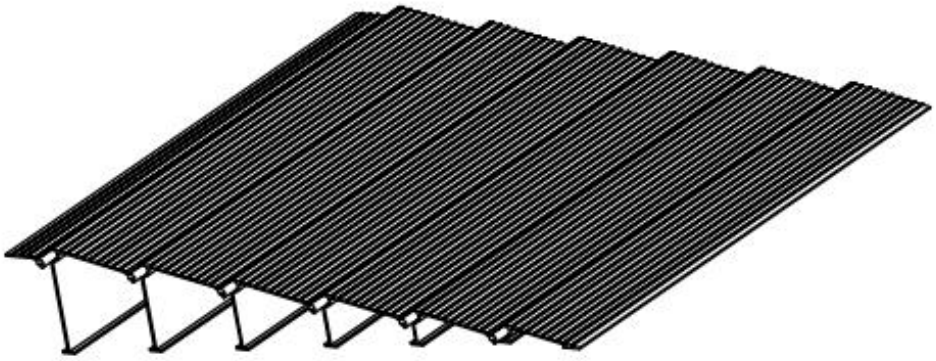

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

1. Safety Instructions

AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement et comprenez les instructions et les procédures avant d'installer et d'utiliser la rampe de seuil.

Ne modifiez pas la conception de la rampe de seuil.

• Ne déplacez pas une rampe de seuil lorsque vous vous tenez dessus.

• Ne pas utiliser par mauvais temps (vent, pluie, neige, etc.). Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

1. Lors de l'installation, veuillez porter des gants pour éviter les blessures aux mains.

2. Ne pas empiler d'objets ni laisser les enfants jouer sur la rampe.

3. Vérifiez régulièrement la structure et les fixations de la rampe pour assurer sa stabilité et sa sécurité.

4. Si la surface de la rampe est usée ou endommagée, veuillez la remplacer ou la réparer à temps.

5. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

7. La méthode de fixation préconisée ne repose pas sur l'utilisation d'adhésifs, ceux-ci n'étant pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

2. Maintenance Guide

1. Placez le produit sur une surface stable, sécurisée, accessible et plane. La charge admissible minimale de cette surface doit être égale à celle de

la rampe (363 kg). Ne dépassez pas la charge admissible maximale du produit.
2. Assurez-vous que le produit repose bien à plat contre le point de départ. Si vous ne trouvez pas de point de départ sûr, accessible et de niveau, ou si le produit ne s'appuie pas correctement contre un point de départ plus haut, n'utilisez pas la rampe.
3. Ne pas altérer, tenter de réparer ou modifier aucune partie du produit. Faire preuve de prudence afin d'éviter les points de pincement lors du montage et de la manipulation.
4. Si vous utilisez ce produit avec un autre équipement de mobilité, veuillez consulter le guide d'utilisation de cet équipement afin de connaître les consignes d'utilisation, notamment la pente, l'inclinaison et le sens d'inclinaison du siège. Ne dépassez pas les recommandations de l'équipement de mobilité.
5. Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement le serrage des fixations de la rampe. Resserrer les fixations desserrées si nécessaire.
6. Lors de l'utilisation de la rampe, assurez-vous qu'elle soit bien alignée avec le point de départ pour garantir la sécurité.
7. Avant chaque utilisation, nettoyez la rampe de toute trace de glace, neige, poussière, feuilles et autres débris. Enlevez la glace et la neige accumulées, puis balayez la surface. Pour la poussière et les débris, utilisez une brosse à poils souples et un détergent non alcalin pour nettoyer la rampe, puis rincez abondamment.
8. La surface de la rampe peut devenir glissante par temps humide. Marchez avec prudence et faites attention où vous mettez les pieds pour éviter de glisser.
9. Si la rampe ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

3. Product Description and Main Features

La rampe d'accès à emboîtement en alliage d'aluminium est fabriquée en profilé d'aluminium extrudé de haute qualité. Ce produit est durable et pratique. Léger, portable, stable et résistant, il est doté d'un système d'emboîtement pour une installation et un rangement faciles.

- Caractéristiques principales :

1. Matériau : Alliage d'aluminium haute résistance, extrudé.
2. Surface : Traitement antidérapant, ébavurage.
3. Conception emboîtable : l’interface de chaque section est conçue avec précision ; alignez l’interface de chaque section et emboîtez- les pour l’installation.
4. Limite de charge : Jusqu'à 800 livres .
5. Hauteur optionnelle : convient aux seuils de différentes hauteurs.

4. Product Parameter

Article	Modèle	Image	Hauteur	Limite de charge	NO	GW
1	LD9YV0		1 pouce	800 livres	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 pouces	800 livres	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 pouces	800 livres	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 pouces	800 livres	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 pouces	800 livres	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 pouces	800 livres	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Avant de commencer l'installation, veuillez porter des gants pour protéger vos mains.
(2) Choisissez un emplacement d'installation approprié, en veillant à ce que le sol soit plat et ferme.
(3) Alignez et emboîtez chaque section de la rampe jusqu'à ce que toutes les pièces soient alignées.
(4) En commençant par la rallonge de 2,5 cm (1 po), installez les rallonges de seuil dans l'ordre indiqué (FIG. 1) jusqu'à atteindre la hauteur finale. Rapprochez les rallonges de seuil à un angle d'environ 45°, puis faites-les pivoter pour les mettre en place une fois l'ampoule engagée dans la fente .

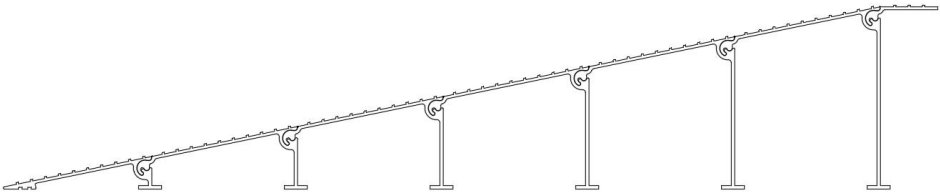


FIG.1



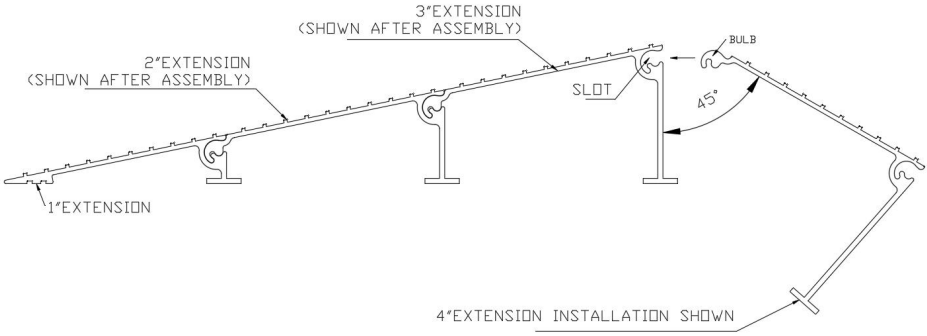


FIG.1

(5) Utilisez les vis fournies pour serrer chaque section de la rampe afin de vous assurer que la rampe ne glisse pas ou ne fait pas de bruit pendant son utilisation .

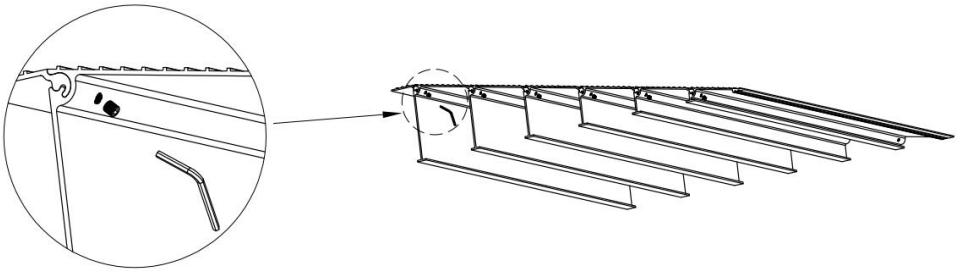

(5) Après l'installation, vérifiez que la rampe est stable et bien fixée au sol.
(6) Lors de l'utilisation de la rampe, poussez l'équipement de haut en bas de manière régulière, en évitant les virages brusques et les accélérations.

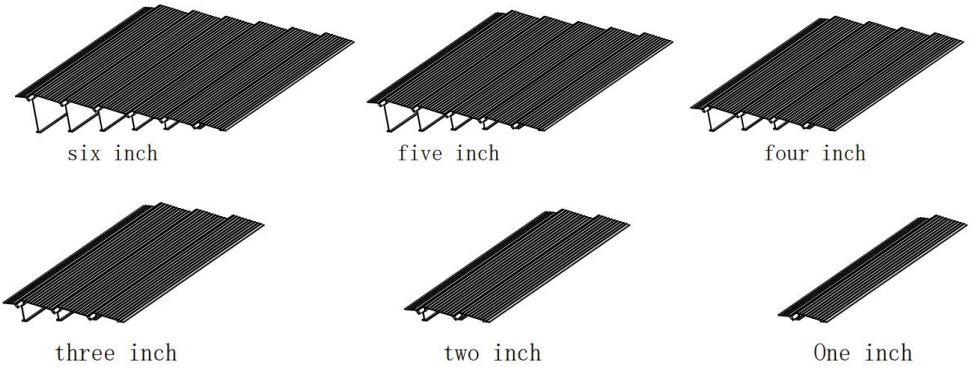



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHWELLE RAMPE
BENUTZERHANDBUCH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

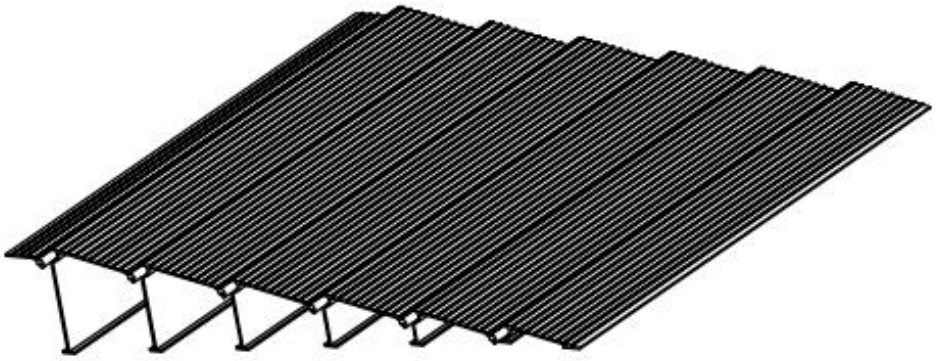

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

1. Safety Instructions

WARNUNG:

Lesen und verstehen Sie die Anweisungen und Vorgehensweisen sorgfältig, bevor Sie die Schwellenrampe installieren und verwenden .
Die Schwellrampenkonstruktion darf nicht verändert werden.

• Bewegen Sie eine Schwellenrampe nicht, während Sie darauf stehen.

• Verwenden Sie die Leiter nicht bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. Es wird empfohlen, die Leiter nur bei klarem Wetter zu benutzen.

1. Bitte tragen Sie während der Installation Handschuhe, um Handverletzungen zu vermeiden.

2. Gegenstände dürfen nicht auf der Rampe gestapelt werden, und Kinder dürfen nicht auf der Rampe spielen.

3. Überprüfen Sie regelmäßig die Konstruktion und die Befestigungselemente der Rampe, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

4. Sollte die Oberfläche der Rampe abgenutzt oder beschädigt sein, ersetzen oder reparieren Sie sie bitte umgehend.

5. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

7. Die angegebene Befestigungsmethode beruht nicht auf der Verwendung von Klebstoffen, da diese nicht als zuverlässiges Befestigungsmittel gelten.

2. Maintenance Guide

1. Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen, sicheren, gut zugänglichen und ebenen Untergrund. Die Mindesttragfähigkeit des Untergrunds muss der Tragfähigkeit der Rampe (800 lbs) entsprechen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt bündig am Startpunkt anliegt. Falls kein sicherer, zugänglicher und ebener Startpunkt gefunden werden kann oder das Produkt nicht sicher an einem höheren Startpunkt anliegt, verwenden Sie die Rampe nicht.
3. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu manipulieren, zu reparieren oder zu verändern. Achten Sie beim Zusammenbau und der Handhabung darauf, dass keine Quetschstellen entstehen.
4. Bei Verwendung des Produkts zusammen mit anderen Mobilitätshilfen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der jeweiligen Hilfsmittel, um die zulässigen Nutzungsrichtlinien, einschließlich der korrekten Neigung, des Neigungswinkels und der Ausrichtung des Stuhls, zu verstehen. Überschreiten Sie nicht die Empfehlungen der Mobilitätshilfen.
5. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung sorgfältig die Befestigungselemente der Rampe, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Ziehen Sie gegebenenfalls lose Befestigungselemente fest.
6. Achten Sie bei der Benutzung der Rampe darauf, dass diese fest und bündig am Startpunkt anliegt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
7. Reinigen Sie die Rampenoberfläche vor jeder Benutzung von Eis, Schnee, Staub, Blättern und anderen Verunreinigungen. Entfernen Sie angesammeltes Eis und Schnee und fegen Sie die Oberfläche sauber. Verwenden Sie für Staub und Schmutz eine weiche Bürste und ein nicht-alkalisches Reinigungsmittel, um die Rampenoberfläche zu reinigen, und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.
8. Die Rampenoberfläche kann bei Nässe rutschig sein. Gehen Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihren Tritt, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
9. Wenn die Rampe längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

3. Product Description and Main Features

Die Schwellenrampe aus Aluminiumlegierung mit Steckverbindung besteht aus hochwertigem Aluminiumprofil. Sie ist langlebig und bietet hohen Bedienkomfort. Die Rampe ist leicht, tragbar, stabil und robust und lässt sich dank des Stecksystems einfach montieren und verstauen.

- Hauptmerkmale:

1. Material: Hochfeste Aluminiumlegierung, stranggepresst.
2. Oberfläche: Rutschhemmende Behandlung, Entgraten.
3. Ineinandergreifendes Design: Die Schnittstellen der einzelnen Abschnitte sind präzise konstruiert; richten Sie die Schnittstellen der einzelnen Abschnitte aus und schieben Sie sie zur Montage zusammen.
4. Belastungsgrenze : Bis zu 800 Pfund
5. Höhe optional : geeignet für Schwellen unterschiedlicher Höhe.

4. Product Parameter

Artikel	Modell	Bild	Höhe	Lastgrenze	NW	GW
1	LD9YV0		1 Zoll	800 Pfund	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 Zoll	800 Pfund	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 Zoll	800 Pfund	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 Zoll	800 Pfund	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 Zoll	800 Pfund	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 Zoll	800 Pfund	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Bitte tragen Sie vor Beginn der Installation Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.
(2) Wählen Sie einen geeigneten Installationsort und achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und fest ist.
(3) Richten Sie die einzelnen Rampensegmente so aus und verriegeln Sie sie, bis alle Teile bündig abschließen.
(4) Beginnen Sie mit der 1-Zoll-Verlängerung und montieren Sie die Schwellenverlängerungen in der gezeigten Reihenfolge (Abb. 1), bis die endgültige Höhe erreicht ist. Führen Sie die Schwellenverlängerungen in einem Winkel von ca. 45° zusammen und drehen Sie sie dann in Position, nachdem die Glühbirne in den Schlitz eingesetzt
wurde .

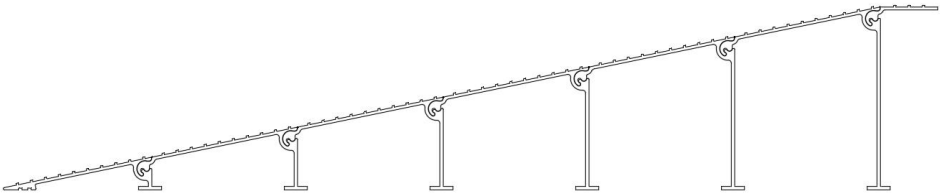


FIG.1


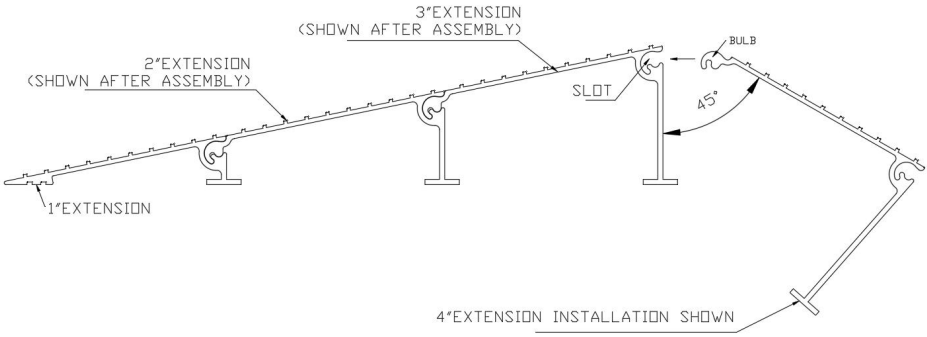


FIG.1


(5) Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um jedes Segment der Rampe festzuziehen und so sicherzustellen, dass die Rampe während der

Benutzung nicht herausrutscht oder Geräusche verursacht .

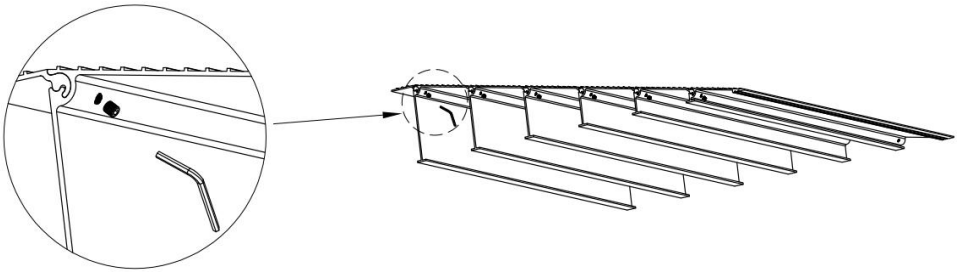

(5) Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Rampe stabil steht und fest am Boden verankert ist.

(6) Beim Benutzen der Rampe schieben Sie das Gerät gleichmäßig die Rampe hinauf und hinunter und vermeiden Sie scharfe Kurven oder zu schnelles Fahren.

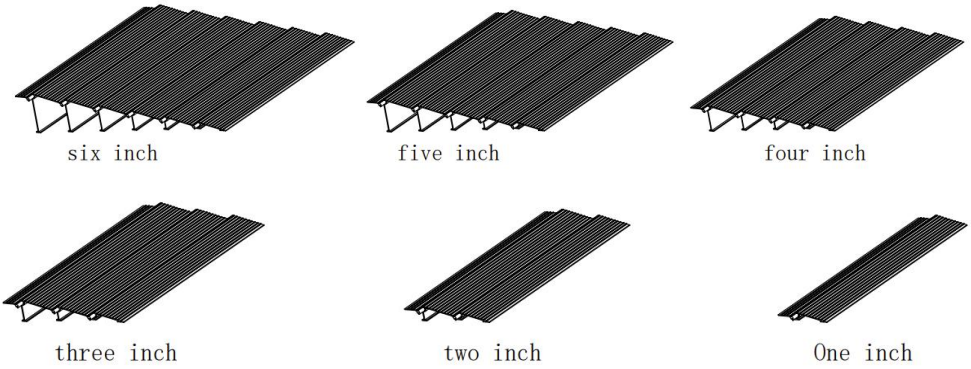



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SOGLIA RAMPA

MANUALE UTENTE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modello: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

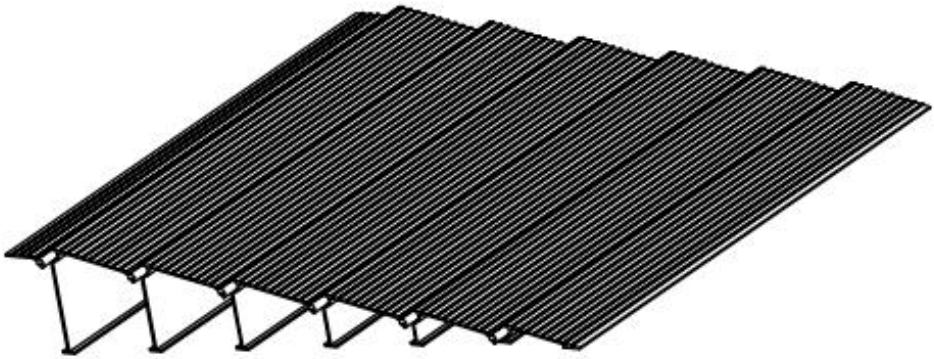

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

1. Safety Instructions

AVVERTIMENTO:

Leggere e comprendere attentamente le istruzioni e le procedure prima di installare e utilizzare la rampa di accesso.

Non modificare il progetto della rampa di accesso.

• Non spostare una rampa di accesso mentre ti trovi sopra.

• Non utilizzare la scala in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via. Si consiglia di utilizzarla con tempo sereno.

1. Durante l'installazione, si prega di indossare i guanti per evitare lesioni alle mani.

2. Non impilare oggetti né permettere ai bambini di giocare sulla rampa.

3. Verificare regolarmente la struttura e i dispositivi di fissaggio della rampa per garantirne la stabilità e la sicurezza.

4. Se la superficie della rampa è usurata o danneggiata, si prega di sostituirla o ripararla tempestivamente.

5 Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

7. Il metodo di fissaggio indicato non si basa sull'uso di adesivi, poiché questi non sono considerati un mezzo di fissaggio affidabile.

2. Maintenance Guide

1. Posizionare il prodotto su un punto di partenza robusto, sicuro, accessibile e pianeggiante. La capacità di carico minima del punto di partenza deve essere pari a quella della rampa (800 libbre). Non superare la capacità di carico massima del prodotto.

2. Assicurarsi che il prodotto aderisca perfettamente al punto di partenza. Se non è possibile trovare un punto di partenza sicuro, accessibile e livellato, o se il prodotto non si adatta saldamente a un punto di partenza più alto, non utilizzare la rampa.
3. Non manomettere, tentare di riparare o modificare alcuna parte del prodotto. Prestare attenzione per evitare punti di schiacciamento durante il montaggio e la manipolazione.
4. Se si utilizza il prodotto con altri ausili per la mobilità, fare riferimento al manuale d'uso dell'ausilio per comprendere le linee guida di utilizzo accettabili, inclusi pendenza, inclinazione e direzione della sedia appropriate. Non superare le raccomandazioni dell'ausilio per la mobilità.
5. Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente i dispositivi di fissaggio della rampa per assicurarsi che non siano allentati. Stringere eventuali dispositivi di fissaggio allentati, se necessario.
6. Quando si utilizza la rampa, assicurarsi che sia ben aderente al punto di partenza per garantire la sicurezza.
7. Prima di ogni utilizzo, pulire la superficie della rampa da ghiaccio, neve, polvere, foglie e altri detriti. Rimuovere il ghiaccio e la neve accumulati e spazzare la superficie. Per la polvere e i detriti, utilizzare una spazzola a setole morbide e un detergente non alcalino per pulire la superficie della rampa, quindi risciacquare abbondantemente.
8. La superficie della rampa potrebbe diventare scivolosa in caso di pioggia. Camminate con cautela e fate attenzione a dove mettete i piedi per evitare di scivolare.
9. Se la rampa non verrà utilizzata per un periodo prolungato, riporla in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

3. Product Description and Main Features

La rampa di accesso con sistema di incastro in lega di alluminio è realizzata con estrusione di lega di alluminio di alta qualità. Questo prodotto è durevole e offre praticità. È leggero, portatile, stabile e

resistente, e presenta un design ad incastro per una facile installazione e conservazione.

- Caratteristiche principali:

1. Materiale: lega di alluminio ad alta resistenza, estrusa.
2. Superficie: Trattamento antiscivolo, sbavatura.
3. Design a incastro: l'interfaccia di ciascuna sezione è progettata con precisione; allineare le interfacce di ciascuna sezione e unirle per l'installazione.
4. Limite di carico : fino a 800 libbre .
5. Altezza opzionale : adatta a soglie di diverse altezze.

4. Product Parameter

Articolo	Modello	Immagine	Altezza	Limite di carico	NW	GW
1	LD9YV0		1 pollice	800 libbre	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 pollici	800 libbre	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 pollici	800 libbre	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 pollici	800 libbre	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 pollici	800 libbre	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 pollici	800 libbre	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Prima di iniziare l'installazione, si prega di indossare dei guanti per proteggere le mani.
(2) Scegliete un luogo di installazione adeguato, assicurandovi che il terreno sia pianeggiante e solido.
(3) Allineare e incastrare ciascuna sezione della rampa fino a quando tutte le parti non risultano allineate.
(4) Partendo dall'estensione da 1 pollice, installare le estensioni della soglia nell'ordine mostrato (FIG. 1) fino a raggiungere l'altezza finale. Avvicinare le estensioni della soglia formando un angolo di circa 45°, quindi ruotarle in posizione dopo aver inserito la lampadina nell'apposito alloggiamento .

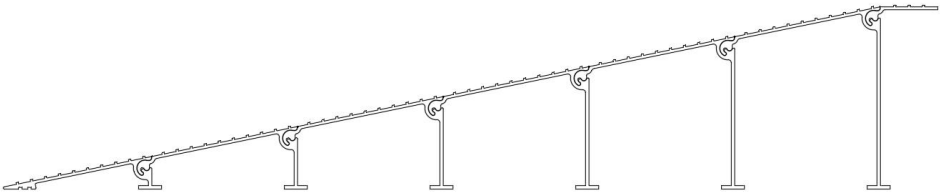


FIG.1


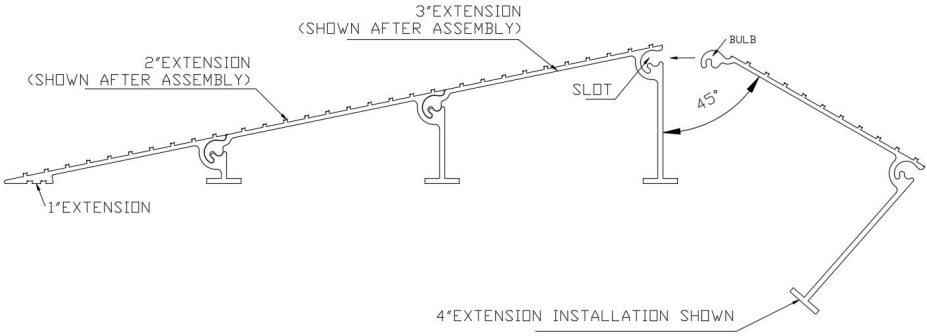



FIG.1

(5) Utilizzare le viti fornite per stringere ciascuna sezione della rampa per garantire che la rampa non scivoli o produca rumore durante l'uso .

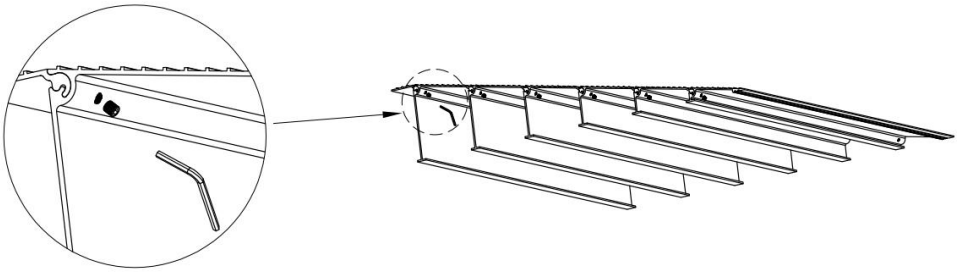

(5) Dopo l'installazione, verificare che la rampa sia stabile e saldamente fissata al terreno.

(6) Quando si utilizza la rampa, spingere l'attrezzatura su e giù in modo costante, evitando curve strette o velocità eccessiva.

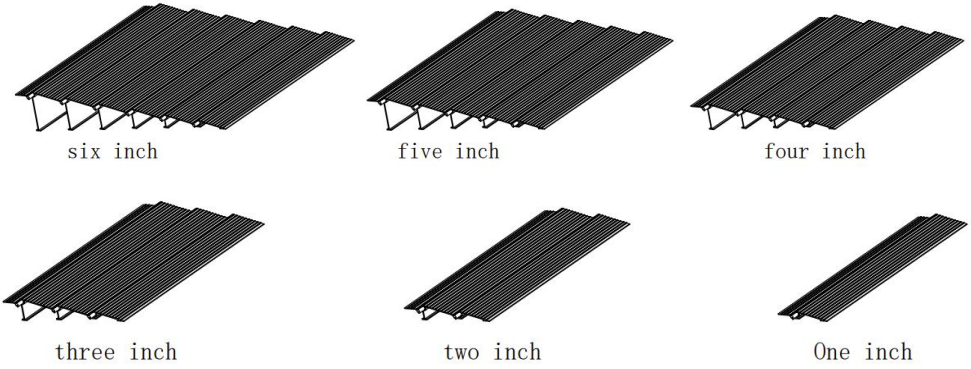



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LÍMITE RAMPA

MANUAL DE USUARIO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modelo: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

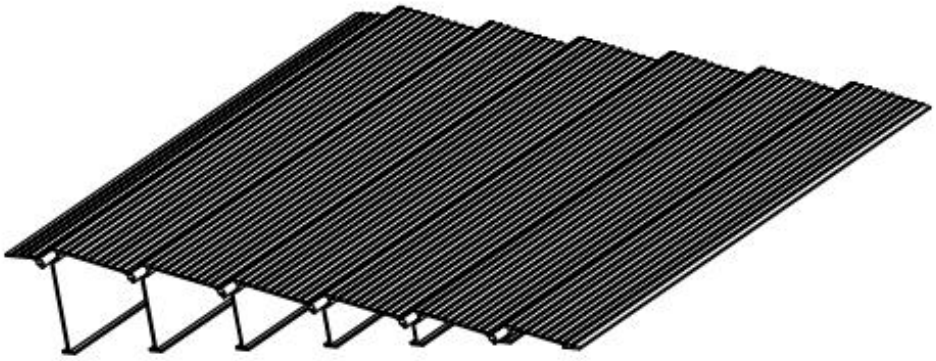

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

1. Safety Instructions

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda atentamente las instrucciones y los procedimientos antes de instalar y utilizar la rampa de umbral.

No modifique el diseño de la rampa del umbral.

• No mueva la rampa de acceso mientras esté parado sobre ella.

• No la utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc. Se recomienda utilizar la escalera en días soleados.

1. Durante la instalación, utilice guantes para evitar lesiones en las manos.

2. No apile objetos ni permita que los niños jueguen en la rampa.

3. Revise periódicamente la estructura y los elementos de fijación de la rampa para garantizar su estabilidad y seguridad.

4. Si la superficie de la rampa está desgastada o dañada, reemplácela o repárela a tiempo.

5. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

7. El método de fijación indicado consiste en no depender del uso de adhesivos, ya que no se consideran un medio de fijación fiable.

2. Maintenance Guide

1. Coloque el producto sobre una superficie de apoyo firme, segura, accesible y nivelada. La capacidad de carga mínima de la superficie de apoyo debe ser igual a la de la rampa (363 kg). No exceda la capacidad de carga máxima del producto.

2. Asegúrese de que el producto quede bien ajustado al punto de partida. Si no se encuentra un punto de partida seguro, accesible y nivelado, o si el

producto no se ajusta correctamente a un punto de partida más elevado, no utilice la rampa.
3. No manipule, intente reparar ni modificar ninguna parte del producto. Tenga cuidado para evitar pellizcos durante el montaje y la manipulación.
4. Si utiliza el producto junto con otros equipos de movilidad, consulte la guía del usuario de dicho equipo para conocer las pautas de uso aceptables, incluyendo la inclinación, el ángulo de inclinación y la orientación de la silla. No exceda las recomendaciones del equipo de movilidad.
5. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente los sujetadores de la rampa para asegurarse de que no estén sueltos. Apriete los sujetadores sueltos si es necesario.
6. Al usar la rampa, asegúrese de que esté bien ajustada al punto de partida para garantizar la seguridad.
7. Antes de cada uso, limpie la superficie de la rampa para eliminar el hielo, la nieve, el polvo, las hojas y otros residuos. Retire el hielo y la nieve acumulados y barra la superficie. Para el polvo y los residuos, utilice un cepillo de cerdas suaves y un detergente no alcalino para limpiar la superficie de la rampa y luego enjuague bien.
8. La superficie de la rampa puede volverse resbaladiza en condiciones de humedad. Camine con precaución y preste atención a dónde pisa para evitar resbalones.
9. Si la rampa no se va a utilizar durante un período prolongado, guárdela en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

3. Product Description and Main Features

La rampa de umbral entrelazada de aleación de aluminio está fabricada con extrusión de aleación de aluminio de alta calidad. Este producto es duradero y práctico. Es ligero, portátil, estable y resistente, y cuenta con un diseño entrelazado que facilita su instalación y almacenamiento.

- Características principales:

1. Material: Aleación de aluminio de alta resistencia, extruida.
2. Superficie: Tratamiento antideslizante, desbarbado.
3. Diseño de encaje: La interfaz de cada sección está diseñada con precisión; simplemente alinee la interfaz de cada sección y presiónelas para su instalación.
4. Límite de carga : Hasta 800 libras .
5. Altura opcional : adecuada para umbrales de diferentes alturas.

4. Product Parameter

Artículo	Modelo	Imagen	Altura	Límite de carga	noroeste	GW
1	LD9YV0		1 pulgada	800 libras	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 pulgadas	800 libras	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 pulgadas	800 libras	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 pulgadas	800 libras	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 pulgadas	800 libras	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 pulgadas	800 libras	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Antes de comenzar la instalación, póngase guantes para protegerse las manos.
(2) Elija un lugar de instalación adecuado, asegurándose de que el terreno esté nivelado y firme.
(3) Alinea y encaja cada sección de la rampa hasta que todas las partes queden niveladas.
(4) Comenzando con la extensión de 1 pulgada, instale las extensiones del umbral en el orden que se muestra (FIG. 1) hasta alcanzar la altura final. Junte las extensiones del umbral en un ángulo aproximado de 45°, luego gírelas hasta colocarlas en su lugar después de que la bombilla esté encajada en la
ranura .

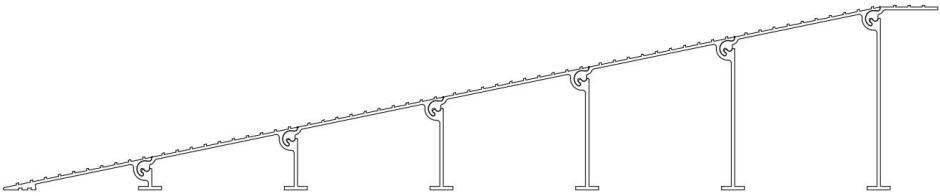


FIG.1


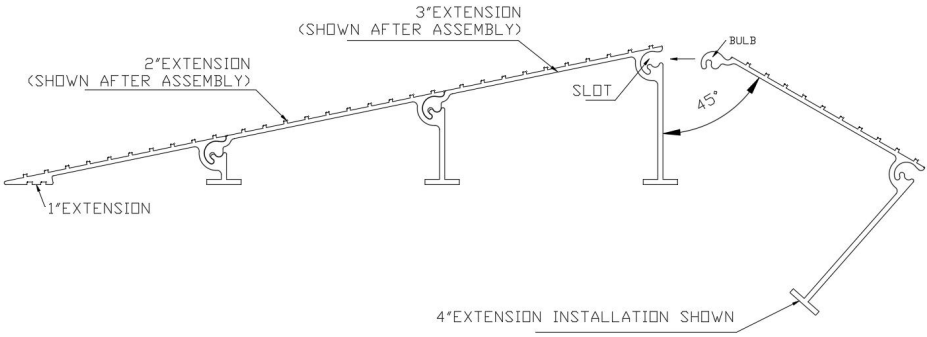


FIG.1


(5) Utilice los tornillos provistos para apretar cada sección de la rampa para asegurarse de que la rampa no se deslice ni haga ruido durante su

uso .

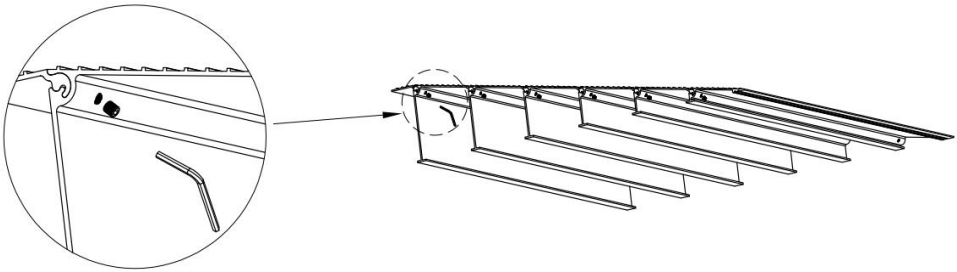

(5) Tras la instalación, compruebe que la rampa sea estable y esté bien sujeta al suelo.

(6) Al usar la rampa, empuje el equipo hacia arriba y hacia abajo de forma constante, evitando giros bruscos o exceso de velocidad.

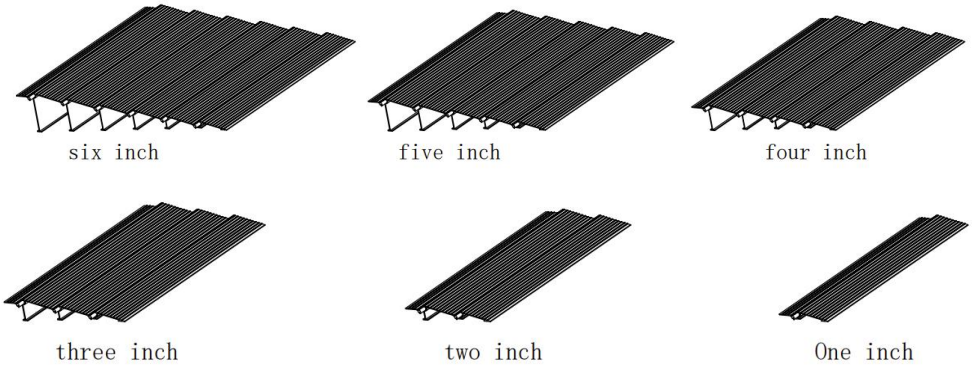



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PRÓG RAMPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modele: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

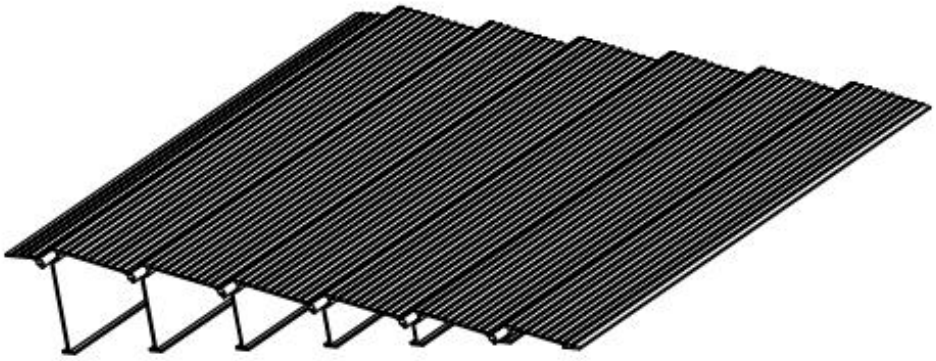

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Safety Instructions

OSTRZEŻENIE:

Przed zainstalowaniem i użyciem rampy progowej należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcję oraz procedury .

Nie należy modyfikować konstrukcji rampy progowej.

• Nie przesuwaj progu rampy stojąc na nim.

• Nie należy używać drabiny przy złej pogodzie, takiej jak wiatr, deszcz, śnieg itp. Zaleca się korzystanie z drabiny przy bezchmurnej pogodzie.

1. Podczas montażu należy nosić rękawice, aby uniknąć obrażeń dłoni.

2. Nie układaj przedmiotów jeden na drugim i nie pozwalaj dzieciom bawić się na rampie.

3. Regularnie sprawdzaj konstrukcję i elementy mocujące rampy, aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

4. Jeśli powierzchnia rampy jest zużyta lub uszkodzona, należy ją wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie.

5. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

7. Podana metoda mocowania nie wymaga użycia klejów, gdyż nie są one uważane za niezawodne środki mocowania.

2. Maintenance Guide

1. Umieść produkt na stabilnym, bezpiecznym, dostępnym i równym punkcie początkowym. Minimalna nośność punktu początkowego musi być równa nośności rampy (800 funtów). Nie przekraczaj maksymalnej

nośności produktu.
2. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie zamocowany na równi z punktem początkowym. Jeśli nie można znaleźć bezpiecznego, dostępnego i równego punktu początkowego lub jeśli produkt nie przylega bezpiecznie do wyższego punktu początkowego, nie używaj rampy.
3. Nie należy ingerować w żadną część produktu, podejmować prób naprawy ani modyfikacji. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć punktów zacisku podczas montażu i obsługi.
4. W przypadku korzystania z produktu z innym sprzętem wspomagającym mobilność, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego sprzętu, aby poznać wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, w tym dotyczące odpowiedniego nachylenia, pochylenia i kierunku ustawienia krzesła. Nie należy przekraczać zaleceń dotyczących sprzętu wspomagającego mobilność.
5. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź, czy mocowania rampy nie są luźne. W razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
6. Podczas korzystania z rampy należy upewnić się, że jest ona ściśle przylega do punktu początkowego, by zagwarantować bezpieczeństwo.
7. Przed każdym użyciem oczyść powierzchnię rampy z lodu, śniegu, kurzu, liści i innych zanieczyszczeń. Usuń nagromadzony lód i śnieg, a następnie zamiataj powierzchnię. Do czyszczenia kurzu i zanieczyszczeń użyj miękkiej szczotki i niealkalicznego detergentu, a następnie dokładnie spłucz powierzchnię rampy.
8. Nawierzchnia rampy może być śliska w mokrych warunkach. Zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na to, gdzie stąpasz, aby się nie poślizgnąć.
9. Jeżeli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

3. Product Description and Main Features


Aluminiowa rampa progowa z blokadą progową wykonana jest z wysokiej

jakości wytłaczanego stopu aluminium. Produkt jest trwały i zapewnia wygodę. Jest lekki, przenośny, stabilny i trwały, a jego konstrukcja blokująca ułatwia montaż i przechowywanie.

- Główne cechy:

1. Materiał: Wysokowytrzymały stop aluminium, wytłaczany.
2. Powierzchnia: obróbka antypoślizgowa, gratowanie.
3. Konstrukcja łącząca: interfejs każdej sekcji jest precyzyjnie zaprojektowany; należy wyrównać interfejs każdej sekcji i docisnąć je do siebie w celu instalacji.
4. Limit obciążenia : do 800 funtów .
5. Wysokość opcjonalna : nadaje się do progów o różnej wysokości.

4. Product Parameter

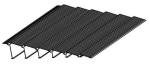Przedmiot	Model	Zdjęcie	Wysokość	Obciążenie L imit	Północny zachód	GW
1	LD9YV0		1 cal	800 funtów	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 cale	800 funtów	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 cale	800 funtów	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 cale	800 funtów	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 cali	800 funtów	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 cali	800 funtów	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Przed rozpoczęciem instalacji należy założyć rękawice, aby chronić dłonie.
(2) Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, upewniając się, że podłoże jest równe i stabilne.
(3) Wyrównaj i zazębiaj poszczególne sekcje rampy, aż wszystkie części będą równe.
(4) Zaczynając od przedłużki 1", zamontuj przedłużki progowe w kolejności pokazanej na rysunku (rys. 1), aż do osiągnięcia ostatecznej wysokości. Złącz przedłużki progowe pod kątem około 45°, a następnie obróć je na miejsce po wsunięciu żarówki w
gniazdo .

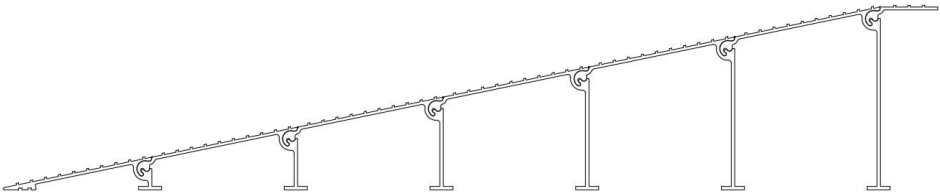


FIG.1


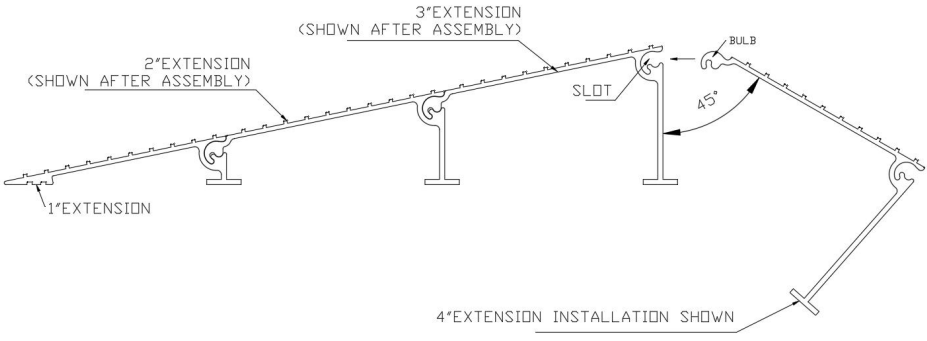


FIG.1


(5) Za pomocą dołączonych śrub dokręć każdą sekcję rampy, aby mieć pewność, że rampa nie będzie się wysuwać ani hałasować podczas

użytkowania .

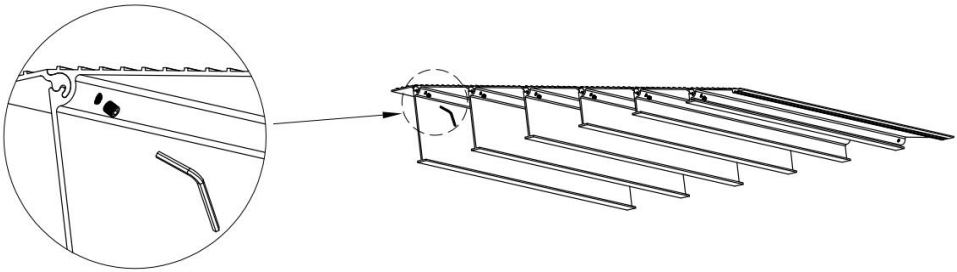

(5) Po montażu należy sprawdzić, czy rampa jest stabilna i dobrze przytwierdzona do podłoża.

(6) Korzystając z rampy, należy przesuwać sprzęt w górę i w dół rampy równomiernie, unikając ostrych zakrętów i nadmiernej prędkości.

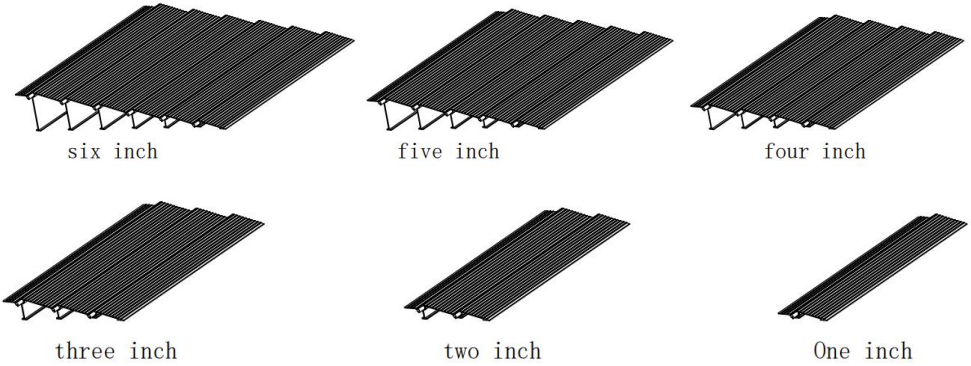



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DREMPELWAARDE HELLING GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

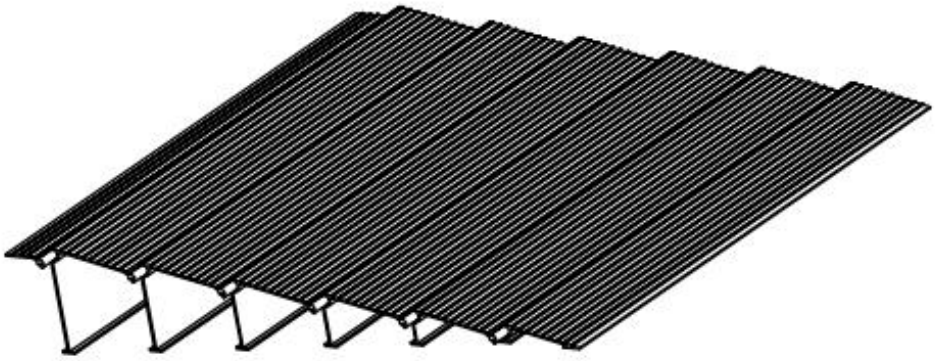

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Safety Instructions

WAARSCHUWING:

Lees en begrijp de instructies en procedures zorgvuldig voordat u de drempelhelling installeert en gebruikt .

Wijzig het ontwerp van de drempelhelling niet.

• Verplaats een drempelhelling niet terwijl u erop staat.

• Gebruik de ladder niet bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort. Het is aan te raden de ladder bij helder weer te gebruiken.

1. Draag tijdens de installatie handschoenen om handletsel te voorkomen.

2. Stapel geen voorwerpen op de hellingbaan en laat kinderen er niet op spelen.

3. Controleer regelmatig de constructie en de bevestigingsmiddelen van de hellingbaan om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

4. Als het oppervlak van de hellingbaan versleten of beschadigd is, vervang of repareer het dan tijdig.

5. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

7. De aangegeven bevestigingsmethode is niet gebaseerd op het gebruik van lijm, aangezien dit geen betrouwbaar bevestigingsmiddel is.

2. Maintenance Guide

1. Plaats het product op een stevige, veilige, toegankelijke en vlakke startpositie. Het minimale draagvermogen van de startpositie moet gelijk zijn aan dat van de hellingbaan (360 kg). Overschrijd het maximale draagvermogen van het product niet.

2. Zorg ervoor dat het product stevig tegen het startpunt aanligt. Als er

geen veilig, toegankelijk en vlak startpunt gevonden kan worden, of als het product niet stevig tegen een hoger startpunt aanligt, gebruik de hellingbaan dan niet.
3. Manipuleer, repareer of wijzig geen enkel onderdeel van het product. Wees voorzichtig om beknellingsgevaar te voorkomen tijdens de montage en het hanteren.
4. Als u het product in combinatie met andere mobiliteitshulpmiddelen gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van die hulpmiddelen voor de richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik, waaronder de juiste hellingshoek, inclinatiehoek en stoelrichting. Overschrijd de aanbevelingen van de mobiliteitshulpmiddelen niet.
5. Controleer vóór elk gebruik de bevestigingsmiddelen op de hellingbaan zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze niet loszitten. Draai losse bevestigingsmiddelen indien nodig vast.
6. Zorg er bij gebruik van de hellingbaan voor dat deze stevig en vlak tegen het startpunt aanligt om de veiligheid te garanderen.
7. Reinig vóór elk gebruik het oppervlak van de hellingbaan van ijs, sneeuw, stof, bladeren en ander vuil. Verwijder opgehoopt ijs en sneeuw en veeg het oppervlak schoon. Gebruik voor stof en vuil een zachte borstel en een niet-alkalisch reinigingsmiddel om het oppervlak van de hellingbaan schoon te maken en spoel het daarna grondig af.
8. Het oppervlak van de hellingbaan kan glad worden bij nat weer. Loop voorzichtig en let goed op waar u loopt om uitglijden te voorkomen.
9. Als de hellingbaan gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

3. Product Description and Main Features

De in elkaar grijpende drempelhelling van aluminiumlegering is gemaakt van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium. Dit product is duurzaam en biedt gebruiksgemak. Het is lichtgewicht, draagbaar, stabiel en duurzaam

en heeft een in elkaar grijpend ontwerp voor eenvoudige installatie en opslag.

- Belangrijkste kenmerken:

1. Materiaal: Zeer sterke aluminiumlegering, geëxtrudeerd.
2. Oppervlaktebehandeling: Antislipbehandeling, ontbramen.
3. In elkaar grijpend ontwerp: De interface van elk onderdeel is nauwkeurig ontworpen; lijn de interfaces van de onderdelen uit en schuif ze in elkaar voor de installatie.
4. Maximale belasting : tot 800 pond .
5. Hoogte naar keuze : geschikt voor drempels van verschillende hoogtes.

4. Product Parameter

Ik tem	Model	Afbeelding	Hoogte	Belastingsl imiet	NW	GW
1	LD9YV0		1 inch	800 pond	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 inch	800 pond	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 inch	800 pond	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 inch	800 pond	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 inch	800 pond	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 inch	800 pond	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Draag handschoenen ter bescherming van uw handen voordat u met de installatie begint.
(2) Kies een geschikte installatielocatie en zorg ervoor dat de ondergrond vlak en stevig is.
(3) Lijn de verschillende delen van de hellingbaan uit en vergrendel ze in elkaar totdat alle delen gelijk liggen.
(4) Begin met de verlenging van 2,5 cm (1 inch) en installeer de drempelverlengstukken in de aangegeven volgorde (afbeelding 1) totdat de gewenste hoogte is bereikt. Breng de drempelverlengstukken onder een hoek van ongeveer 45° samen en draai ze vervolgens op hun plaats nadat de lamp in de gleuf is
geplaatst .

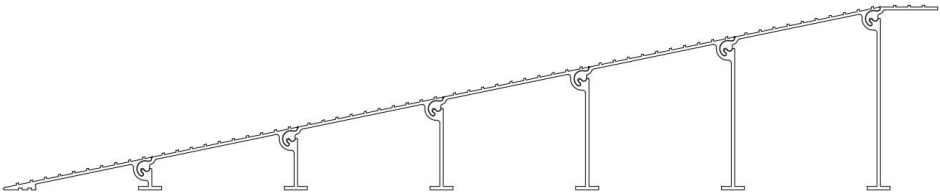


FIG.1


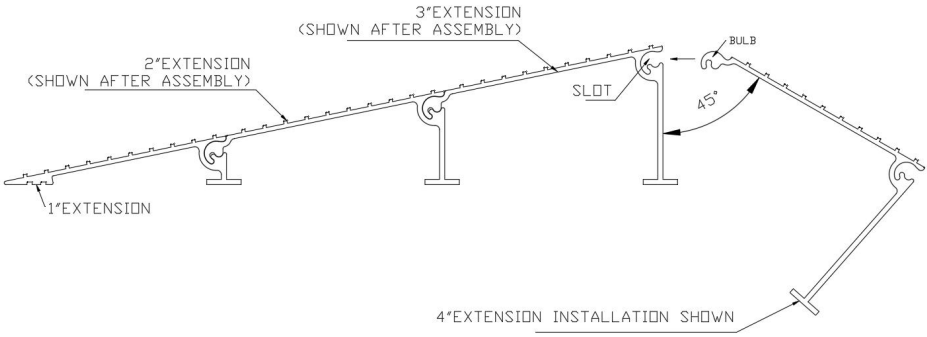


FIG.1


(5) Gebruik de meegeleverde schroeven om elk deel van de hellingbaan vast te zetten, zodat de hellingbaan niet wegglijdt of lawaai maakt tijdens

gebruik .

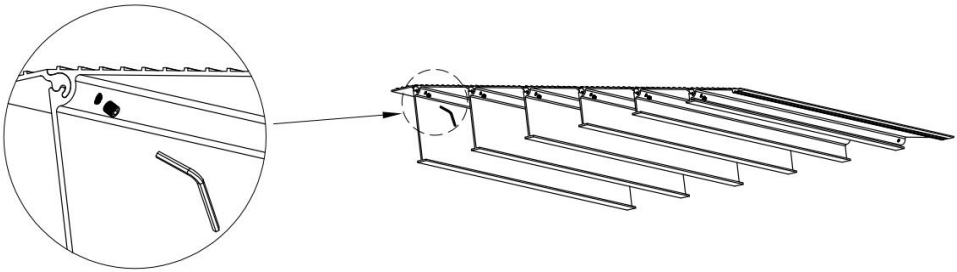

(5) Controleer na de installatie of de hellingbaan stabiel is en stevig aan de grond bevestigd is.

(6) Bij gebruik van de hellingbaan dient u de apparatuur gestaag omhoog en omlaag te duwen, waarbij u scherpe bochten en snelheid vermijdt.

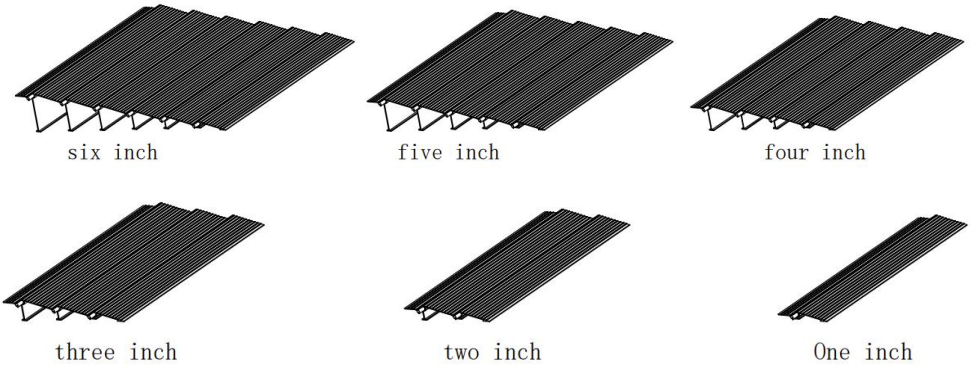



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

TRÖSKEL RAMP
ANVÄNDARMANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

THRESHOLD RAMP

Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0

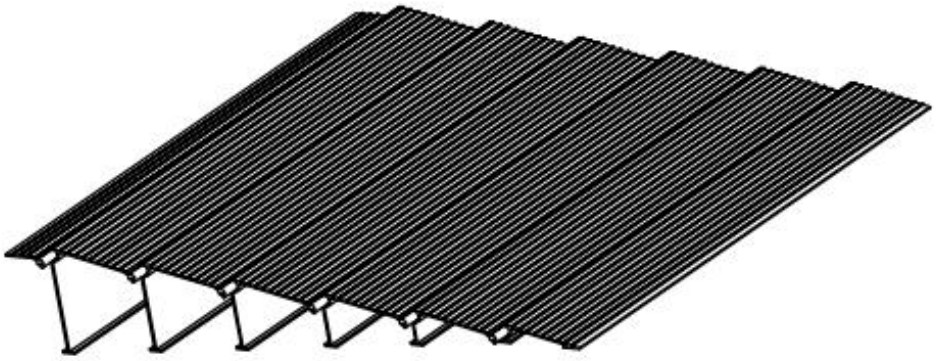

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Safety Instructions

VARNING:

Läs och förstå noggrant instruktioner och procedurer innan du installerar och använder tröskelrampen.

Modifiera inte tröskelrampens utformning.

• Flytta inte en tröskelramp medan du står på den.

• Använd den inte i dåligt väder, såsom vind, regn, snö och så vidare. Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.

1. Använd handskar under installationen för att förhindra handskador.

2. Stapla inte föremål och låt inte barn leka på rampen.

3. Kontrollera regelbundet rampens konstruktion och fästelement för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet.

4. Om rampens yta är sliten eller skadad, vänligen byt ut eller reparera den i tid.

5 Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

7. Den angivna fästmetoden ska inte vara beroende av användning av lim eftersom de inte anses vara ett tillförlitligt fästmedel.

2. Maintenance Guide

1. Placera produkten på en stadig, säker, lättillgänglig och jämn startpunkt. Startpunktens minsta viktkapacitet måste vara lika med rampens (800 lbs). Överskrid inte produktens maximala viktkapacitet.

2. Se till att produkten är ordentligt ansluten till startpunkten. Om en säker, tillgänglig och jämn startpunkt inte kan hittas, eller om produkten inte passar ordentligt mot en högre startpunkt, använd inte rampen.

3. Manipulera inte, försök inte reparera eller modifiera någon del av produkten. Var försiktig för att undvika klämpunkter under montering och hantering.
4. Om produkten används med andra mobilitetshjälpmedel, se utrustningens bruksanvisning för att förstå acceptabla användningsriktlinjer, inklusive lämplig lutning, lutning och stolsriktning. Överskrid inte rekommendationerna för mobilitetshjälpmedlet.
5. Kontrollera noggrant fästena på rampen före varje användning för att säkerställa att de inte är lösa. Dra åt eventuella lösa fästen vid behov.
6. När du använder rampen, se till att den ligger ordentligt i jämnhöjd med startpunkten för att garantera säkerheten.
7. Rengör rampytan från is, snö, damm, löv och annat skräp före varje användning. Avlägsna ansamlad is och snö och sopa ytan ren. Använd en mjuk borste och icke-alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra rampytan och skölj sedan noggrant.
8. Rampytan kan bli hal i vått underlag. Var försiktig och var uppmärksam på ditt fotfäste för att förhindra halka.
9. Om rampen inte ska användas under en längre tid, förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, skyddat från direkt solljus.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

3. Product Description and Main Features

Den tröskelmonterade rampen i aluminiumlegering är tillverkad av högkvalitativ aluminiumlegering. Produkten är hållbar och bekväm för människor. Den är lätt, bärbar, stabil och hållbar och har en sammankopplad design för enkel installation och förvaring.

- Huvudfunktioner:

1. Material: Höghållfast aluminiumlegering, extruderad.
2. Yta: Halkskyddsbehandling, avgradning.
3. Sammankopplande design: Varje sektions gränssnitt är exakt utformat; justera varje sektions gränssnitt och tryck ihop dem för installation.
4. Lastgräns : Upp till 800 pund .

5. Höjd åtta valfritt : lämplig för trösklar med olika höjder.

4. Product Parameter

Jag tem	Modell	Bild	H åtta	Belastning sgräns	nordväst	GW
1	LD9YV0		1 tum	800 pund	1,5 kg	1,9 kg
2	LYIMV0		2 tum	800 pund	2,7 kg	3,2 kg
3	Z2UAV0		3 tum	800 pund	4,0 kg	4,5 kg
4	GRBRV0		4 tum	800 pund	5,45 kg	6,0 kg
5	OVUSV0		5 tum	800 pund	7,05 kg	7,95 g
6	SNPTV0		6 tum	800 pund	8,6 kg	9,56 kg

5. Installation Guide

(1) Innan du påbörjar installationen, använd handskar för att skydda händerna.

(2) Välj en lämplig installationsplats och se till att marken är jämn och fast.

(3) Rikta in och fäst varje sektion av rampen tills alla delar är jämna.

(4) Börja med 2,5 cm-förlängningen och montera tröskelförlängningarna i den ordning som visas (FIG. 1) tills den slutliga höjden är uppnådd. För ihop tröskelförlängningarna i en vinkel på ungefär 45° och rotera dem sedan på plats efter att glödlampan har fästs i skåran .

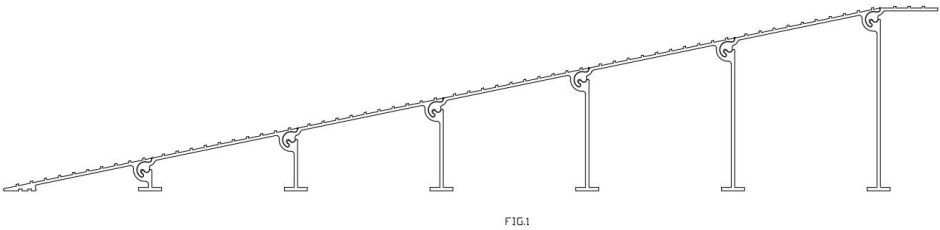


FIG.1


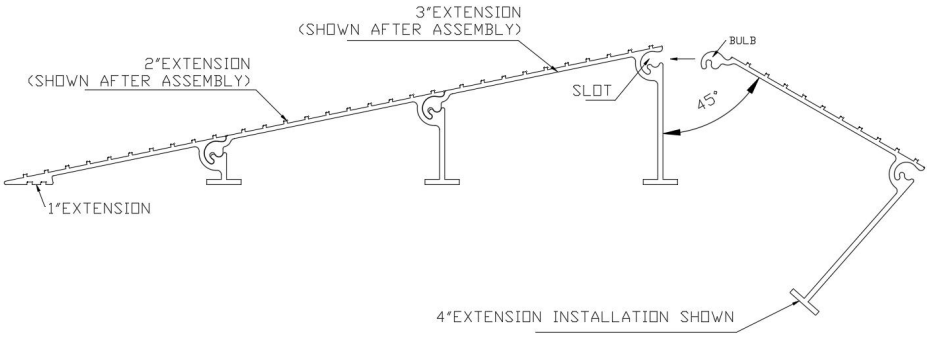


FIG.1

(5) Använd de medföljande skruvarna för att dra åt varje del av rampen för att säkerställa att rampen inte glider ut eller låter illa under användning .

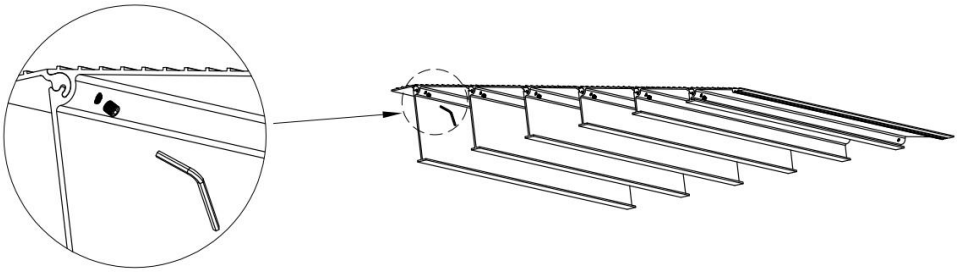

(5) Efter installationen, kontrollera om rampen är stabil och ordentligt fäst vid marken.

(6) När du använder rampen, skjut utrustningen stadigt upp och ner för rampen och undvik skarpa svängar eller fortkörning.

